

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTED DRIVING

MODEL:FBL825309

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
ASSISTED DRIVING

MODEL: FBL825309



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better written with this equipment. Hope the company's products and services to bring you the canal courtesy.

Pay attention

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual, misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

Manufacturer's liability

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

Guarantee

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment(except parts) are in regular use and repair condition, free of manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

PRECAUTIONS

Precautions for use

Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.







9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Product Name	Standard assisted driving
model	FBL825309
Load bearing capacity/lb	350lbs

PRODUCT COMPONENTS

1		Left main frame	1	2		Right main frame	1
3		H-pole	1	4		Hindfoot canal	2
5		Front right foot wheel set	1	6		Front left foot wheel set	1

INSTALLATION STEPS

1. Install the left main frame: Insert one side of the H-pole into the left main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble bounces.



2. Install the right main frame: Insert the other side of the H pole into the right main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.




3. Install the right foot wheel group: Insert the front right foot wheel group into the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.



4. Install the left foot wheel assembly: Insert the front left foot wheel assembly into the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.



5. Install straight leg tubes: Insert the two rear leg tubes into the two tubes behind the main frame, align them with the holes, and press the marbles inward until they pop out.

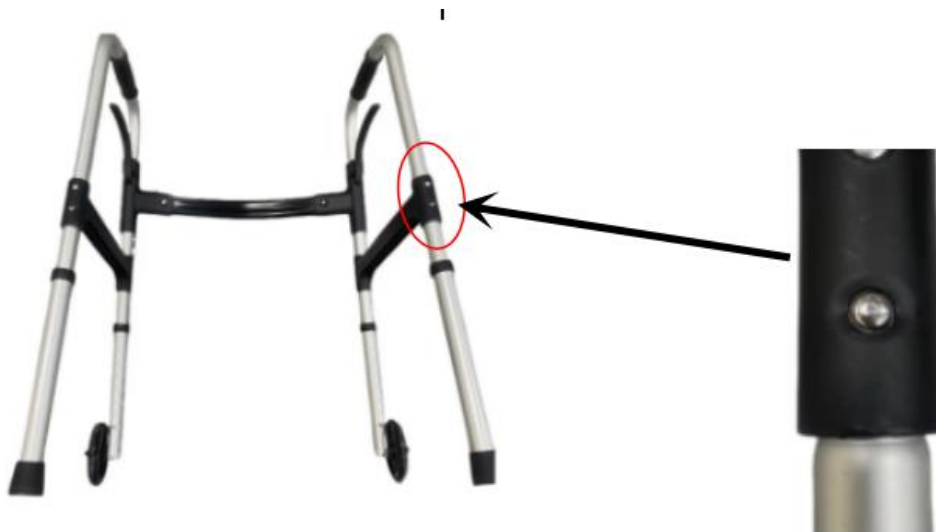

6. Main frame folding: Lift the handle by hand and apply force to the inside of the main frame to fold the main frame armrest.



Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CONDUITE ASSISTÉE STANDARD

MODÈLE : FBL825309

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

CONDUITE ASSISTÉE

MODÈLE : FBL825309



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Préface

Tout d'abord, permettez-nous d'exprimer nos sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement. Ce manuel est destiné au service client pour mieux écrire avec cet équipement. J'espère que les produits et services de l'entreprise vous apporteront la courtoisie du canal.

Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel. L'utilisation abusive de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation. La Société ne donne aucune garantie d'aucune sorte, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte à la Société à des fins particulières. Garanties implicites d'adéquation.

La société décline toute responsabilité. La société ne sera pas tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages accidentels ou consécutifs résultant de la fourniture, de l'exécution ou de l'utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par la loi sur les brevets. Tous droits réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel ne peut être photocopié, copié ou traduit en tout ou en partie dans une autre langue.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

Responsabilité du fabricant

La Société ne sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances de l'équipement que si l'opération de montage, de retour, d'amélioration et d'entretien sont effectués par du personnel agréé par la Société, si l'équipement électrique concerné est conforme aux normes nationales et si l'équipement est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Garantie

Procédé de fabrication et matières premières : La Société garantit que l'équipement (à l'exception des pièces) est en état d'utilisation et de réparation régulier, exempt de défauts de processus de fabrication et de matières premières pendant un an à compter de la date de l'expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

PRÉCAUTIONS

Précautions d'emploi

Avertissement:

1. Si l'équipement semble lâche, tombe ou est endommagé, veuillez contacter le entreprise dans le temps;
2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres invitent accidents.
3. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions seront vous faire perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser en compagnie de votre famille ou de vos amis amis.
5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser. quand le corps n'est pas en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLETS, QUE LE FREIN SOIT SENSIBLE ET ASSEMBLER L'ENSEMBLE DU PRODUIT EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS.
7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS AVEC DE L'EAU ET SÉCHER DANS LE TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT A RAYURES ET CHUTES, DES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉ À TEMPS POUR OBTENIR LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.
8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉ POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS LA ENVIRONNEMENT EN PENTE.







9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DU SIÈGE
LA PLAQUE EST VERROUILLÉE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit	Conduite assistée standard
modèle	FBL825309
Capacité de charge/lb	350 livres

COMPOSANTS DU PRODUIT

1		Gauche principal cadre	1	2		Main droite cadre	1
3		poteau en H	1	4		Pied arrière canal	2
5		Devant droite pied roue ensemble	1	6		Avant gauche roue à pied ensemble	1

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Installez le cadre principal gauche : insérez un côté du poteau en H dans le cadre principal gauche, alignez-le avec la position du trou, maintenez la bille et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la bille rebondisse.



2. Installez le cadre principal droit : insérez l'autre côté du poteau en H dans le cadre principal droit, alignez-le avec la position du trou, maintenez la bille et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la bille sorte.




3. Installez le groupe de roues du pied droit : insérez le groupe de roues du pied avant droit dans le cadre principal, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la balle sorte.



4. Installez l'ensemble roue du pied gauche : insérez l'ensemble roue du pied avant gauche dans le cadre principal, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la balle sorte.



5. Installez les tubes de jambe droits : insérez les deux tubes de jambe arrière dans les deux tubes derrière le cadre principal, alignez-les avec les trous et appuyez sur les billes vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elles sortent.

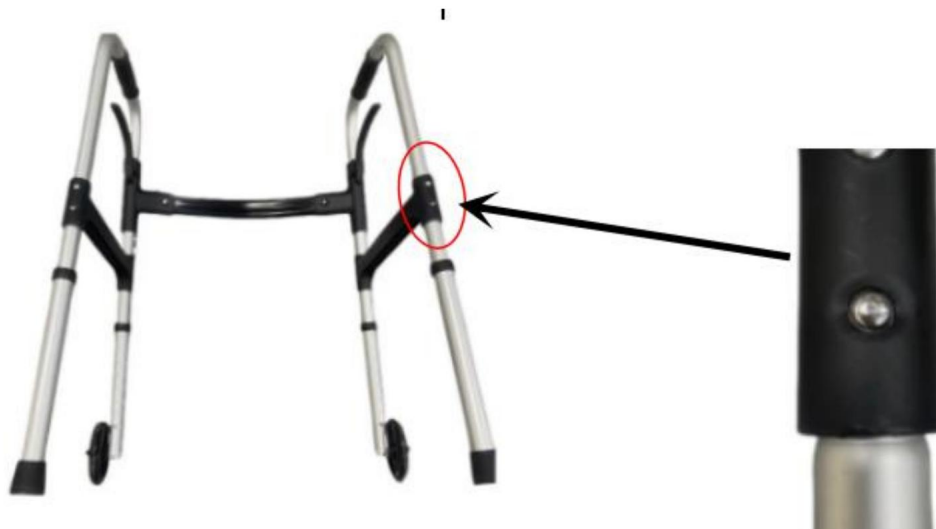

6. Pliage du cadre principal : soulevez la poignée à la main et appliquez une force à l'intérieur du cadre principal pour plier l'accoudoir du cadre principal.



Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et service client par e-mail convivial 24 heures sur 24.


Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté Yumin
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122

Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

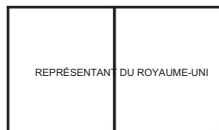

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

STANDARDASSISTENTES FAHREN

MODELL:FBL825309

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

ASSISIERTES FAHREN

MODELL: FBL825309



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

Vorwort

Zunächst möchten wir unseren herzlichsten Dank an unsere Kunden aussprechen, die unsere Geräte gekauft haben. Dieses Handbuch dient unserem Kundenservice und soll den Umgang mit diesen Geräten verbessern. Wir hoffen, dass Ihnen die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens mit freundlicher Genehmigung des Kanals dienen.

Passt auf

Dieses Produkt muss streng gemäß der in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungsmethode verwendet werden. Der Missbrauch jeglicher anderer Methoden ist auf Missbrauch zurückzuführen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Garantien jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) die dem Unternehmen für einen bestimmten Zweck angebotene Marktgängigkeit oder stillschweigende Garantien bezüglich der Eignung.

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für in diesem Material enthaltene Fehler oder für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung, tatsächlichen Ausführung oder Verwendung dieses Handbuchs ergeben.

Dieses Handbuch enthält patentrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist es nicht gestattet, dieses Handbuch zu fotokopieren, zu vervielfältigen oder Teile davon in eine andere Sprache zu übersetzen.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung an den Benutzer geändert werden.

Haftung des Herstellers

Das Unternehmen übernimmt nur dann die Verantwortung für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Leistung der Geräte, wenn Montage, Rückgabe, Verbesserung und Wartung durch vom Unternehmen autorisiertes Personal erfolgen, die betreffenden elektrischen Geräte den nationalen Normen entsprechen und die Geräte entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Garantie

Herstellungsverfahren und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass Die Ausrüstung (außer Teile) ist in normalem Gebrauchs- und Reparaturzustand, frei von Herstellungsprozess- und Rohstofffehler für ein Jahr ab dem Datum der Lieferung. Keine unserer Inspektionen ist perfekt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Warnung:

1. Wenn sich das Gerät locker anfühlt, herunterfällt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Unternehmen rechtzeitig;
2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche laden Unfälle.
3. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, Ablenkungen werden kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
4. Bei normalem Gebrauch bitte in Begleitung von Familie oder Freunde.
5. Verwenden Sie es angemessen entsprechend Ihrer eigenen Situation und übertreiben Sie es nicht wenn der Körper nicht rechtzeitig in der Lage ist.
6. VOR DEM GEBRAUCH BITTE ÜBERPRÜFEN, OB DIE KOMPONENTEN SIND VOLLSTÄNDIG, OB DIE BREMSE EMPFINDLICH IST UND MONTIEREN SIE DAS GESAMTE PRODUKT UNTER STRENGER EINHALTUNG DIE ANLEITUNG.
7. REINIGUNGSMITTEL MÜSSEN MIT WASSER GEWASCHEN WERDEN UND TROCKNEN SIE RECHTZEITIG. WENN DIE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG DES PRODUKTS KRATZER UND FÄLLT AB, REPARATURMATERIALIEN MÜSSEN Bei rechtzeitiger Anwendung wird die beste Rostschutzwirkung erzielt.
8. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DAS HINTERRAD DES PRODUKTES VERRIEGELT, UM EIN VERSCHIEBEN ZU VERMEIDEN, WENN DER BENUTZER IM ABGEFALLENE UMGEBUNG.







9. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER KLAPPMECHANISMUS DES SITZES
BEI VERWENDUNG DIESES PRODUKTS IST DIE PLATTE GESPERRT.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

Produktname	Standardmäßiges assistiertes Fahren
Modell	FBL825309
Tragfähigkeit/lb	350 Pfund

PRODUKTKOMPONENTEN

1		Links hauptsächlich rahmen	1	2		Rechtes Haupt rahmen	1
3		H-Pol	1	4		Rückfuß Kanal	2
5		Front Rechts Fuß Rad Satz	1	6		Vorne links Fußrad Satz	1

INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Installieren Sie den linken Hauptrahmen: Stecken Sie eine Seite der H-Stange in den linken Hauptrahmen, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel abprallt.



2. Installieren Sie den rechten Hauptrahmen: Stecken Sie die andere Seite der H-Stange in den rechten Hauptrahmen, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel herauspringt.




3. Installieren Sie die rechte Fußradgruppe: Setzen Sie die vordere rechte Fußradgruppe in den Hauptrahmen ein, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel herauspringt.



4. Installieren Sie die linke Fußradbaugruppe: Setzen Sie die vordere linke Fußradbaugruppe in den Hauptrahmen ein, richten Sie sie an der Lochposition aus, halten Sie die Murmel fest und drücken Sie sie nach innen, bis die Murmel herauspringt.



5. Gerade Beinrohre montieren: Die beiden hinteren Beinrohre in die beiden Rohre hinter dem Hauptrahmen stecken, an den Löchern ausrichten und die Murmeln nach innen drücken, bis sie herauspringen.

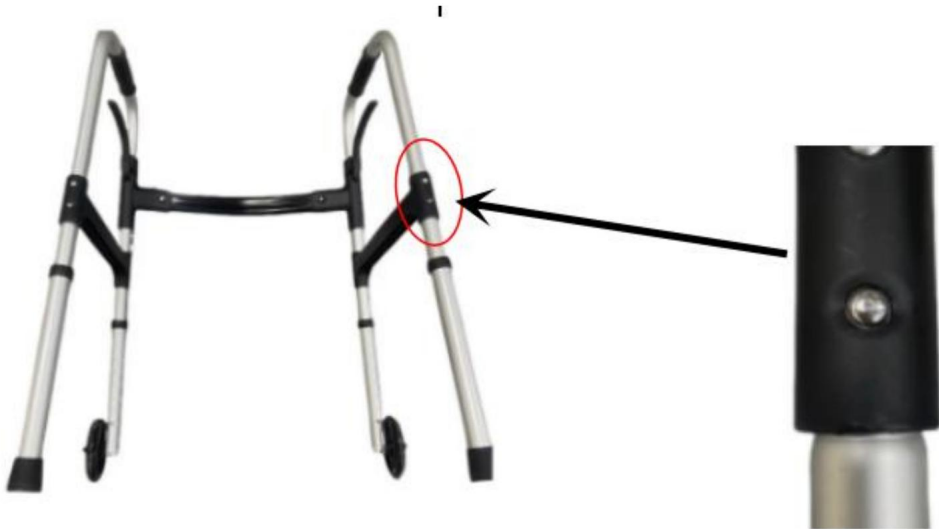

6. Hauptrahmen zusammenklappen: Heben Sie den Griff mit der Hand an und üben Sie Kraft auf die Innenseite des Hauptrahmens aus, um die Armllehne des Hauptrahmens zusammenzuklappen.



Guter Service: 100 % getestet vor Verlassen des Werks und rund um die Uhr freundlicher E-Mail-Kundenservice.

Hersteller: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse: 3-6F & 7F-1, Nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

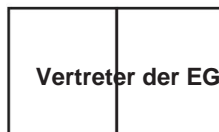

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

GUIDA ASSISTITA STANDARD

MODELLO:FBL825309

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

GUIDA ASSISTITA

MODELLO: FBL825309



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Prefazione

Innanzitutto, desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti ai clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è stato scritto per aiutare il servizio clienti a migliorare l'uso di questa attrezzatura. Ci auguriamo che i prodotti e i servizi dell'azienda vi offrano la cortesia del canale.

Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo d'uso descritto nel presente manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio. La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta alla Società per uno scopo particolare. Garanzie implicite di idoneità.

La società non accetta alcuna responsabilità. La Società non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale, o per eventuali danni accidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso di questo manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, non è consentito fotocopiare, copiare o tradurre alcuna parte di questo manuale in un'altra lingua.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

Responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità delle prestazioni dell'attrezzatura solo se le operazioni di montaggio, restituzione, miglioramento e manutenzione vengono eseguite da personale approvato dalla Società, l'attrezzatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'attrezzatura viene utilizzata in conformità alle istruzioni operative.

Garanzia

Processo di fabbricazione e materie prime: La Società garantisce che l'attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, priva di difetti del processo di fabbricazione e delle materie prime per un anno dalla data della spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

PRECAUZIONI

Precauzioni per l'uso

Avvertimento:

1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare il
azienda nel tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie invitano
incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento, le distrazioni saranno
farti perdere il controllo.
4. Durante l'uso normale, utilizzare con l'accompagnamento della famiglia o
amici.
5. Utilizzare ragionevolmente in base alla propria situazione e non abusare
quando il corpo non è in tempo.
6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE SE I COMPONENTI
SONO COMPLETI, SIA CHE IL FRENO SIA SENSIBILE, E
ASSEMBLARE L'INTERO PRODOTTO NEL RISPETTO PIENO DELLE NORME
LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E
ASCIUGARE NEL TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO HA
GRAFFI E CADUTE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE
UTILIZZATO NEL TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA
BLOCCATO PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE NELLA
AMBIENTE IN PENDENZA.







9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI RIPIEGAMENTO DEL SEDILE
LA PIASTRA È BLOCCATA QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	Guida assistita standard
modello	FBL825309
Capacità di carico/libbra	350 libbre

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1		Sinistra principale telaio	1	2		Diritto principale telaio	1
3		Palo H	1	4		Retro piede canale	2
5		Davanti Giusto piede ruota impostato	1	6		Anteriore sinistro ruota a pedale impostato	1

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Installare il telaio principale sinistro: inserire un lato del palo H nel telaio principale sinistro, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non rimbalza.



2. Installare il telaio principale destro: inserire l'altro lato del palo H nel telaio principale destro, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.




3. Installare il gruppo ruota del piede destro: inserire il gruppo ruota del piede anteriore destro nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



4. Installare il gruppo ruota del piede sinistro: inserire il gruppo ruota del piede anteriore sinistro nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



5. Installare i tubi delle gambe dritte: inserire i due tubi delle gambe posteriori nei due tubi dietro il telaio principale, allinearli con i fori e premere le biglie verso l'interno finché non fuoriescono.

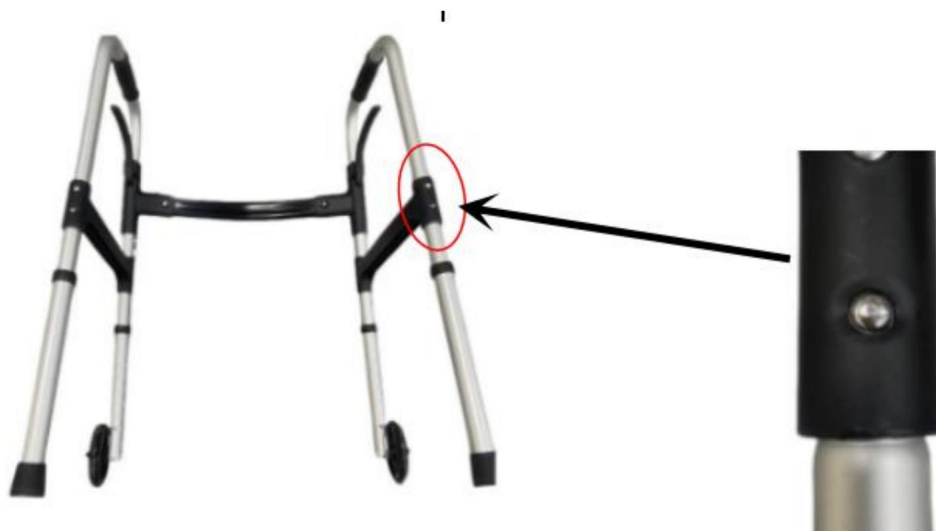

6. Piegatura del telaio principale: sollevare manualmente la maniglia ed esercitare forza sulla parte interna del telaio principale per piegare il bracciolo del telaio principale.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e servizio clienti cordiale via e-mail 24 ore su 24.

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

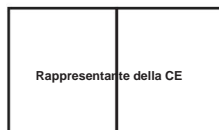

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

CONDUCCIÓN ASISTIDA ESTÁNDAR

MODELO:FBL825309

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilizemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTÁNDAR

CONDUCCIÓN ASISTIDA

MODELO: FBL825309



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Prefacio

En primer lugar, permítanos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han adquirido nuestro equipo. Este manual es para el servicio al cliente para hacer un mejor uso de este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa le brinden el canal de cortesía.

Prestar atención

Este producto debe utilizarse en estricta conformidad con el método de uso de este manual. El mal uso de cualquier otro método causado por un uso indebido del mismo. La Compañía no otorga garantía de ningún tipo, incluyendo (pero no limitado a) la comercialización ofrecida a la Compañía para un propósito particular. Garantías implícitas de idoneidad.

La empresa no asume ninguna responsabilidad. La empresa no será responsable de ningún error que pueda contener este material ni de ningún daño accidental o consecuente que resulte de la provisión, el desempeño real o el uso de este manual.

Este manual contiene información confidencial protegida por la ley de patentes. Reservados todos los derechos. No se permite fotocopiar, copiar ni traducir ninguna parte de este manual a otro idioma sin el consentimiento por escrito de la empresa.

El contenido incluido en este manual puede modificarse sin previo aviso al usuario.

Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del funcionamiento del equipo solo si las operaciones de montaje, devolución, mejora y mantenimiento son realizadas por personal aprobado por la Compañía, el equipo eléctrico en cuestión cumple con las normas nacionales y el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de operación.

Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La Empresa garantiza que

El equipo (excepto las piezas) se encuentra en condiciones normales de uso y reparación, libre de defectos en el proceso de fabricación y en las materias primas durante un año a partir de la fecha del envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

PRECAUCIONES

Precauciones de uso

Advertencia:

1. Si el equipo se afloja, se cae o está dañado, comuníquese con el compañía en el tiempo;
2. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan accidentes.
3. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, ya que pueden producirse distracciones. hacer que pierdas el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo con el acompañamiento de familiares o amigos. amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar. cuando el cuerpo no esta en el momento oportuno.
6. ANTES DE USAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN COMPLETOS, YA SEA SENSIBLE EL FRENO, Y MONTAR TODO EL PRODUCTO EN ESTRICTO ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECAR A TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL DEL PRODUCTO TIENE RASGUÑOS Y CAÍDAS, ES NECESARIO REPARAR MATERIALES UTILIZADO A TIEMPO PARA LOGRAR EL MEJOR EFECTO ANTIÓXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADO PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN EL ENTORNO PENDIENTE.







9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DEL ASIENTO
LA PLACA ESTÁ BLOQUEADA AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Conducción asistida estándar
modelo	FBL825309
Capacidad de carga/lb	350 libras

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1		Izquierda principal marco	1	2		Principal derecha marco	1
3		Polo H	1	4		Retropié canal	2
5		Frente bien pie rueda colocar	1	6		Delantero izquierdo rueda de pie colocar	1

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Instale el marco principal izquierdo: inserte un lado del poste H en el marco principal izquierdo, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que rebote.



2. Instale el marco principal derecho: inserte el otro lado del poste H en el marco principal derecho, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.




3. Instale el grupo de ruedas del pie derecho: inserte el grupo de ruedas del pie delantero derecho en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.



4. Instale el conjunto de la rueda del pie izquierdo: inserte el conjunto de la rueda del pie delantero izquierdo en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.



5. Instale los tubos de las patas rectas: inserte los dos tubos de las patas traseras en los dos tubos detrás del marco principal, alinéelos con los orificios y presione las canicas hacia adentro hasta que salgan.

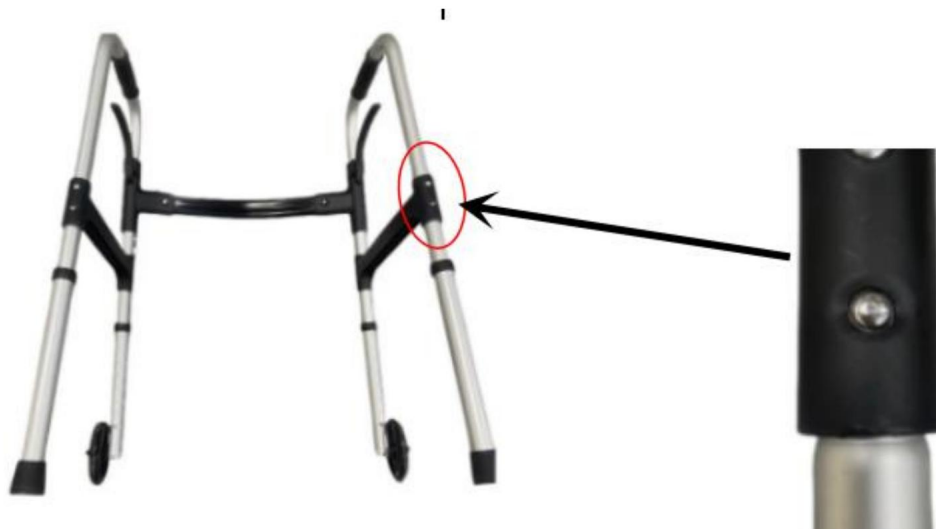

6. Plegado del marco principal: Levante la manija con la mano y aplique fuerza en el interior del marco principal para plegar el apoyabrazos del marco principal.



Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y servicio al cliente por correo electrónico amigable las 24 horas.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

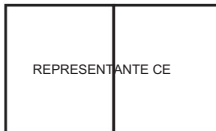

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

STANDARDOWE WSPOMAGANIE JAZDY

MODEL:FBL825309

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

WSPOMAGANE JAZDY

MODEL: FBL825309



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Przedmowa

Przed wszystkim chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność klientom, którzy zakupili nasz sprzęt. Niniejsza instrukcja ma na celu ulepszenie obsługi klienta w odniesieniu do tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi naszej firmy przyniosą Ci uprzejmość.

Uważać na

Ten produkt musi być używany ściśle według sposobu użytkowania opisanego w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie jakichkolwiek innych metod jest spowodowane niewłaściwym użyciem. Spółka nie udziela żadnej gwarancji, w tym (ale nie wyłącznie) wartości rynkowej produktu oferowanego Spółce w określonym celu. Domniemane gwarancje przydatności.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale ani za jakiegokolwiek przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z dostarczenia, faktycznego wykonania lub użycia tej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Spółki, niniejszej instrukcji nie wolno kserować, kopiować ani tłumaczyć żadnej jej części na inny język.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność działania sprzętu wyłącznie w przypadku, gdy montaż, obsługa, zwrot, udoskonalenie i konserwacja są przeprowadzane przez personel zatwierdzony przez Spółkę, dany sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi i jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Spółka gwarantuje, że

Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie nadającym się do normalnego użytkowania i naprawy, wolny od wady procesu produkcyjnego i surowców przez okres jednego roku od daty przesyłki. Żadna z naszych inspekcji nie jest idealna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie:

1. Jeśli sprzęt wydaje się luźny, spada lub jest uszkodzony, skontaktuj się z firmą na czas;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagrożone lub ciemne obszary zapraszają Wypadki.
3. Podczas obsługi urządzenia trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od siebie, gdyż mogą one rozpraszają uwagę, spowodować utratę kontroli.
4. Podczas normalnego użytkowania należy korzystać z urządzenia w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, zgodnie z własną sytuacją i nie nadużywaj gdy organizm nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY SKŁADNIKI SĄ SĄ KOMPLETNE, CZY HAMULEC JEST CZUŁY, I ZMONTUJ CAŁY PRODUKT ŚCIŚLE ZGODNIE Z INSTRUKCJE.
7. PRODUKTY CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ WODĄ I WYSCHNIE W CZASIE. JEŚLI POWIERZCHNIA POWŁOKI PRODUKTU ZOSTAŁA ZARYSOWANIA I ODPADNIĘCIA, MATERIAŁY DO NAPRAWY MUSZĄ BYĆ STOSOWANE NA CZAS W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZEGO EFEKTU ANTYRODZOWEGO.
8. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁO PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE, ABY UNIKNĄĆ ZEŚLIZGANIA, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE W ŚRODOWISKO POCHYLE.







9. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA SIEDZISKA JEST DZIAŁAJĄCY
PODZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU PŁYTA JEST ZABLOKOWANA.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu	Standardowe wspomaganie jazdy
model	FBL825309
Nośność/funt	350 funtów

SKŁADNIKI PRODUKTU

1		Lewy główny rama	1	2		Prawa strona główna rama	1
3		Słup H	1	4		Tyłna część stopy kanał	2
5		Przód Prawidłowy stopa koło ustawić	1	6		Przód lewy koło nożne ustawić	1

KROKI INSTALACJI

1. Zainstaluj lewą ramę główną: Włóż jedną stronę słupka H do lewej ramy głównej, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wpychaj ją do środka, aż kulka odbije się.



2. Zainstaluj prawą ramę główną: Włóż drugą stronę słupka H do prawej ramy głównej, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wsuń ją do środka, aż kulka wyskoczy.




3. Zamontuj prawą grupę kółek nożnych: Włóż prawą przednią grupę kółek nożnych do ramy głównej, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wsuń ją do środka, aż kulka wyskoczy.



4. Zamontuj lewy zespół kółek: Włóż lewy przedni zespół kółek do ramy głównej, wyrównaj go z otworem, przytrzymaj kulkę i wciśnij ją do środka, aż kulka wyskoczy.



5. Zamontuj proste rury nóg: Włóż dwie tylne rury nóg do dwóch rur za główną ramą, wyrównaj je z otworami i wciśnij kulki do środka, aż wyskoczą.

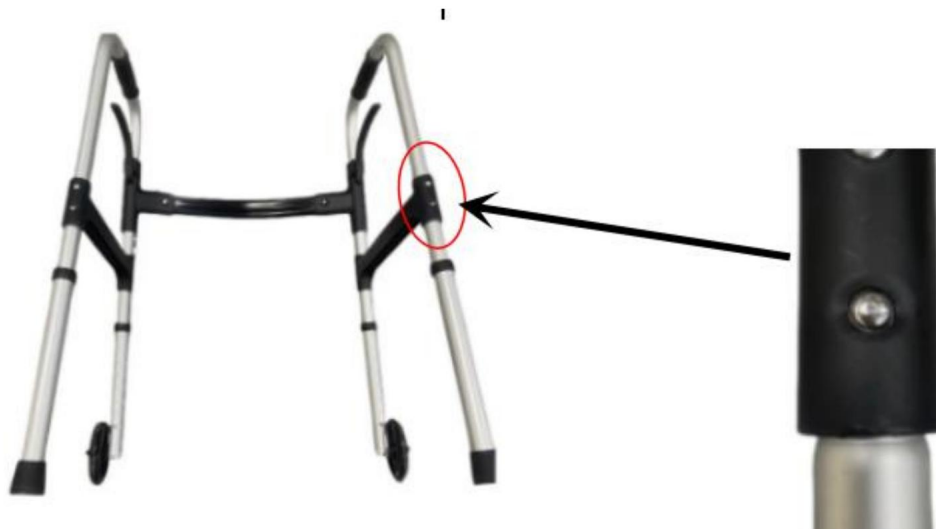

6. Składanie ramy głównej: Podnieś uchwyt ręcznie i naciśnij na wewnętrzną stronę ramy głównej, aby złożyć podłokietnik ramy głównej.



Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i całodobowa, przyjazna obsługa klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin

Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,

Dom Centuriona, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

STANDAARD BEHULPZAAM RIJDEN

MODEL:FBL825309

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDAARD
BEGELEID RIJDEN

MODEL: FBL825309



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die onze apparatuur hebben gekocht. Deze handleiding is bedoeld om de klantenservice die met deze apparatuur is geschreven, te verbeteren. We hopen dat de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid brengen.

Let op

Dit product moet strikt volgens de gebruiksmethode in deze handleiding worden gebruikt. Misbruik van andere methoden kan het gevolg zijn van misbruik. Het bedrijf geeft geen enkele garantie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die het bedrijf biedt voor een bepaald doel. Impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, of voor accidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, feitelijke uitvoering of het gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd is door patentrecht. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf mag deze handleiding niet worden gefotokopieerd, gekopieerd of vertaald in een andere taal.

De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het Bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de prestaties van de apparatuur als de montage, het retourneren, de verbetering en het onderhoud worden uitgevoerd door door het Bedrijf goedgekeurd personeel, de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen en de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het bedrijf garandeert dat de apparatuur (behalve onderdelen) verkeert in normale gebruiks- en reparatieconditie, vrij van fabricageproces en fouten in de grondstoffen gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Waarschuwing:

1. Als het apparaat los aanvoelt, valt of beschadigd is, neem dan contact op met de bedrijf in de tijd;
2. Zorg dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik, er kunnen afleidingen zijn. ervoor zorgen dat u de controle verliest.
4. Gebruik het bij normaal gebruik met begeleiding van familie of vrienden. vrienden.
5. Gebruik het op een redelijke manier, afhankelijk van uw eigen situatie, en overdrijf het niet. wanneer het lichaam niet op tijd is.
6. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN ZIJN VOLLEDIG, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER HET GEHELE PRODUCT STRIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.
7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN MET WATER WORDEN GEWASSEN EN DROOG OP TIJD. ALS DE OPPERVLAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN EN VALLLEN, REPARATIEMATERIALEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT OP TIJD GEBRUIKT OM HET BESTE ANTI-ROEST EFFECT TE BEREIKEN.
8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT VERGRENDELD OM SCHUIVEN TE VOORKOMEN WANNEER DE GEBRUIKER IN DE HELLENDE OMGEVING.







9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE STOEL
DE PLAAT IS VERGRENDELD BIJ GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam	Standaard ondersteund rijden
model	FBL825309
Draagvermogen/lb	350 pond

PRODUCTCOMPONENTEN

1		Links voornaamst kader	1	2		Rechts hoofd kader	1
3		H-paal	1	4		Achtervoet kanaal	2
5		Voorkant rechts voet wiel set	1	6		Voor links voetwiel set	1

INSTALLATIESTAPPEN

1. Plaats het linkerhoofdframe: Plaats één zijde van de H-paal in het linkerhoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen totdat de knikker stuitert.



2. Plaats het rechterhoofdframe: Plaats de andere kant van de H-paal in het rechterhoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen totdat de knikker eruit springt.




3. Installeer de rechervoetwielgroep: Plaats de rechervoetwielgroep in het hoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen totdat de knikker eruit springt.



4. Plaats het linker voetwiel: Plaats het linker voorste voetwiel in het hoofdframe, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de knikker eruit springt.



5. Plaats de rechte pootbuizen: Plaats de twee achterste pootbuizen in de twee buizen achter het hoofdframe, lijn ze uit met de gaten en druk de knikers naar binnen totdat ze eruit springen.

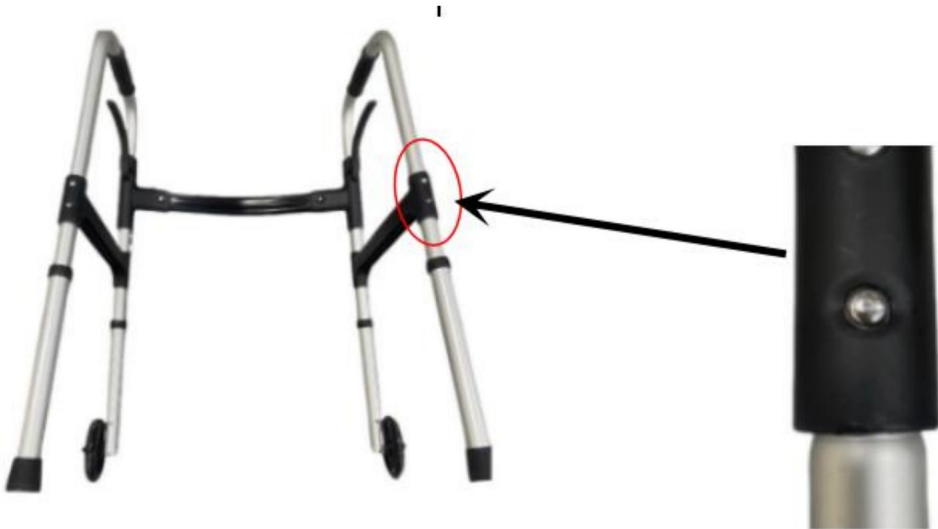

6. Opvouwen van het hoofdframe: Til de hendel met de hand op en oefen kracht uit op de binnenkant van het hoofdframe om de armsteun van het hoofdframe op te vouwen.



Uitstekende service: 100% getest voordat het product de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke klantenservice via e-mail.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL825309

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL825309



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Förord

Först och främst, låt oss uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Denna manual är till för att kundtjänst ska bli bättre. Skriven med denna utrustning. Hoppas att företagets produkter och tjänster ger dig kanalen artighet.

Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, missbruk av andra metoder orsakade av felaktig användning. Företaget ger ingen garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds företaget för en särskilt ändamål. Underförstådda garantier med lämplighet.

Bolaget tar inget ansvar. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta material, eller för eventuella oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av tillhandahållande, faktisk prestanda eller användning av denna manual.

Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter reserverade. Utan företagets skriftliga medgivande är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk.

Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten av utrustningens prestanda endast om montering, återlämning, förbättring och underhåll utförs av personal som godkänts av företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.

Garanti

Tillverkningsprocess och råvaror: Företaget garanterar det Utrustningen (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationskick, fri från tillverkningsprocess och råvarufel i ett år från datumet av sändningen. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder för användning

Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad, vänligen kontakta företag i tid;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta medan du arbetar, distraktioner kommer att göra det få dig att tappa kontrollen.
4. Under normal användning, använd tillsammans med familjen eller vänner.
5. Rimligt använda efter ens egen situation, och överanvänd inte när kroppen inte är i rätt tid.
6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETTA, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH MONTERA HELA PRODUKTEN ENLIGT ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEläggning HAR REPAR OCH FALLAR AV, REPARATIONSMATERIAL MÅSTE FINNAS ANVÄNDS I TID FÖR ATT UPPNÅ DEN BÄSTA ANTIROSTEFFEKTEN.
8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA ATT GLIDDA NÄR ANVÄNDAREN BLIR I DEN SLUTANDE MILJÖ.







9. KONTROLLERA ATT SITSSENS VÄCKNINGSMEKANISM
PLATEN ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Produktnamn	Standard assisterad körning
modell	FBL825309
Bärförmåga/lb	350 pund

PRODUKTKOMPONENTER

1		Vänster huvud ram	1	2		Höger huvud ram	1
3		H-stolpe	1	4		Bakfot kanal	2
5		Främre rätt fot hjul <small>uppställning</small>	1	6		Fram till vänster fothjul <small>uppställning</small>	1

INSTALLATIONSSTEG

1. Installera den vänstra huvudramen: Sätt in ena sidan av H-stolpen i den vänstra huvudramen, rikta in den mot hålpositionen, håll kulan och tryck in den tills marmorn studsar.



2. Installera den högra huvudramen: Sätt in den andra sidan av H-stolpen i den högra huvudramen, rikta in den mot hålpositionen, håll kulan och tryck in den tills marmorn hoppar ut.




3. Installera den högra fothjulsgruppen: Sätt in den främre högra fothjulsgruppen i huvudramen, rikta in den mot hålpositionen, håll kulan och tryck in den tills kulan hoppar ut.



4. Installera den vänstra fothjulsenheten: Sätt in den främre vänstra fothjulsenheten i huvudramen, rikta in den mot hålpositionen, håll kulan och tryck den inåt tills kulan hoppar ut.



5. Installera raka benrör: Sätt in de två bakre benrören i de två rören bakom huvudramen, rikta in dem med hålen och tryck kulorna inåt tills de hoppar ut.

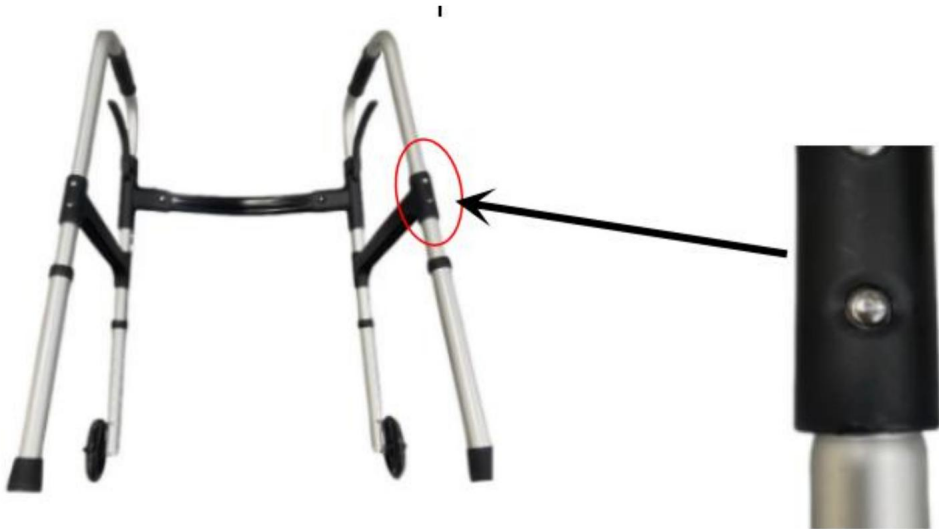

6. Vikning av huvudramen: Lyft handtaget för hand och applicera kraft på insidan av huvudramen för att fälla ihop huvudramens armstöd.



Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-postkundservice.

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adress: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support