

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Padded u-sling

MODEL:13220S,13220M,13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODEL:13220S,13220M,13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Padded u-sling.
Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Do not use your Vevor sling without first reading and understanding the operator's manual supplied with your Vevor sling. If you are unable to understand the warnings or instructions contact a healthcare professional before attempting to use your sling. Using your sling without properly understanding the instructions and the warnings can cause injury to the patient and/or caregiver, and cause damage to the sling.

 **WARNING:** Check the sling for damage or missing parts before using. In case of damage or incompleteness, DO NOT use the sling. Contact Vevor Customer Service for further instructions

 **WARNING:** Carefully inspect the sling before each use and after each laundering for wear and damage to seams, fabric, and handles. Torn, cut, frayed or damaged

slings can fail,resulting in serious personal injury to the user or caregiver.Use only slide sheets that are in good condition.Discard and destroy old,unusable slings and replace with a new one.

⚠ WARNING:DO NOT exceed the patient lift or the patient slings maximum weight capacity..

⚠WARNING:Notice for California Customers –California Proposition 65 Warning –This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or develop– mental harm.

⚠WARNING: Vevor assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper application or use of this product.

⚠ WARNING:Never leave a patient unattended while in a patient lift sling.

⚠ WARNING:Never attempt to re–position a patient by pulling on the sling loops.

General Guidelines for Using the Sling:

Use an appropriate Patient Sling that is recommended by the individual's doctor, nurse, or medical assistant for the comfort and safety of the individual being lifted and their specific medical need.

DO NOT use any kind of material (such as a plastic back incontinence pad or seating cushion) between the patient and any patient sling as this may cause the patient to slide out of the sling during transferring.

The loops of the sling are color coded and can be used to place the patient in various positions. The colors make it easy to connect both sides of the sling equally. Make sure that there is sufficient head support when lifting a patient.

Sling Material

Sling Material: Polyester / Straps Material: Polypropylene

Using a Divided Leg Sling, U-Sling, or Toileting Sling

Note: Please make sure the patient's weight does not exceed the weight capacity for the patient sling or lift before you attempt to lift the patient.

Note: Use the following method to easily move the patient and avoid strain to yourself.

Note: The following method assumes a caregiver and an assistant.

⚠ WARNING: If the patient is in a wheelchair, secure the wheel locks in place to prevent the wheelchair from moving forward or back-wards

1. Lock both rear wheel locks on the wheelchair. Refer to Figure 1.

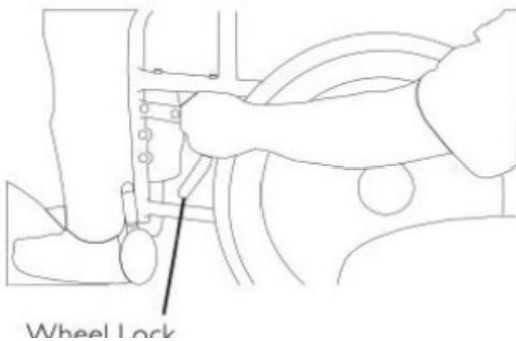


FIGURE1:Wheel Lock

2. With the patient sitting in a wheelchair one assistant is in front of the wheelchair and the other assistant in the back of the wheelchair, lean the patient forward. Refer to Detail "A" in Figure 2.

Note: The front assistant will be supporting the weight of the patient.

Note: Toileting slings have a waist buckle which helps hold the sling in

place during positioning.

3. Place the sling behind the patient (with “grab handle” on the outside) and bring the flaps out alongside the patient's legs.

Refer to Detail "B" in Figure 2.

Note: For the Divided Leg sling and U-Sling: the back of the sling should be parallel to the patient's upper arms and be positioned between the top of the patient's head and the base of the spine.



FIGURE 2: Positioning the Sling

4. With the back of the sling positioned properly, push the bottom of the back section to the seat.
5. Lean the patient back into the wheel-chair with the assistant in the rear supporting his/her weight.

Note: For the Toileting Sling: the back of the sling should be parallel to the patient's upper arms and be positioned between the top of the patient's mid back and the base of the spine

6. Lift the patient's legs (one at a time) and reach under the patient's leg to pull the front of the sling until it is behind the patient's knees (about 3 inches). The back of the sling should remain in position. Refer to Details "C" to "F" in Figure 3.

Note: The straps may be around, crossed between or underneath the patient's legs.

Refer to Detail "G" in Figure 3.

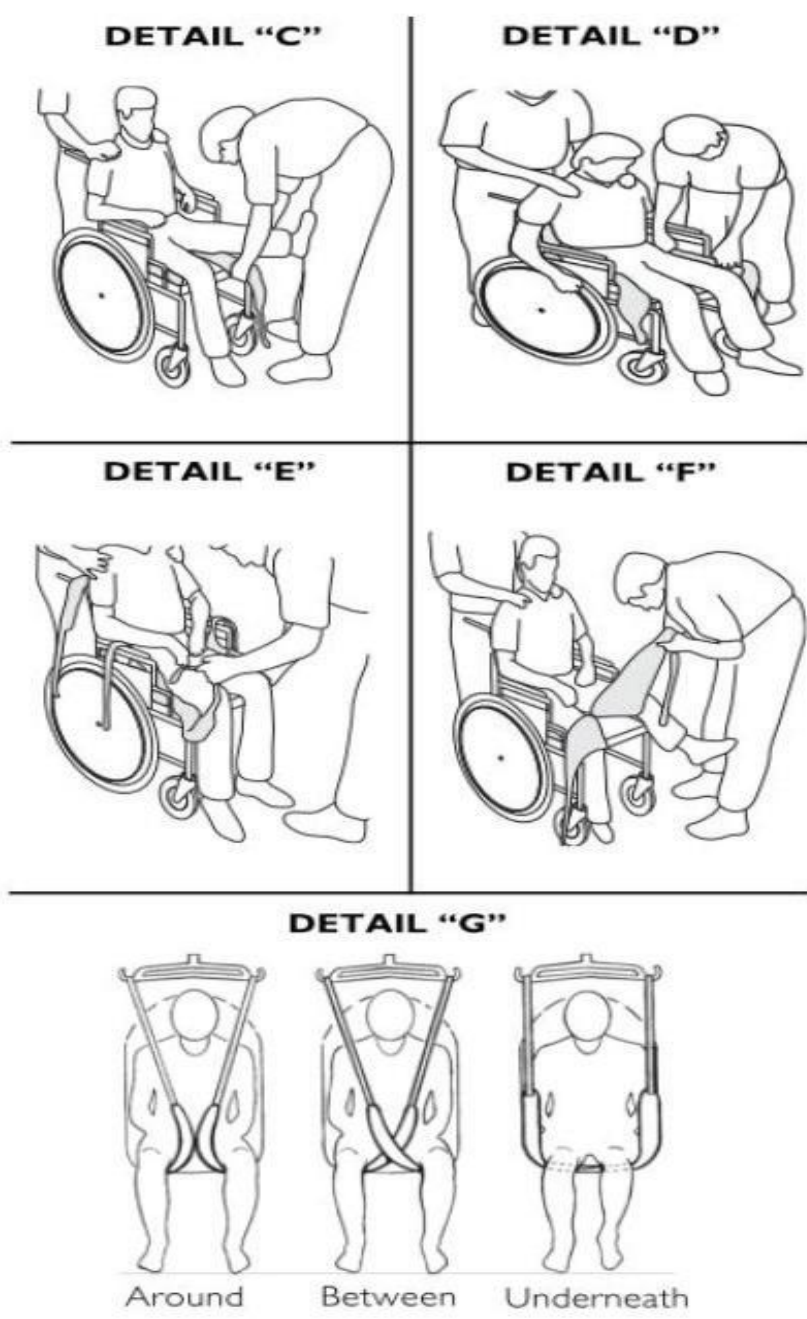


FIGURE 3: Positioning the Sling

Washing Instructions:

Machine wash in warm water or cold water at normal cycle. Maximum water temperature of 120°F (48°C). Air dry or tumble dry at cool or very low temperature. DO NOT use bleach or wash with other colors. Inspect after each wash. DO NOT dry clean.

▲ WARNING: Inspect patient slings for wear prior to each use. If signs of tearing, fraying or wear are found, discard the sling immediately; worn out slings are not safe for use and may result in injury or death. Do not alter slings in any way.

Lifetime Limited Warranty

Your Vevor sling is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is extended only to the original purchaser/user of our Vevor slings. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Vevor's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement or repair of any such product. Vevor's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement. Useful life of this product is 6 months from date of purchase under normal use, however, heavy use or excessive washing may reduce the useful life of the product. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear, or incorrect washing and drying at temperatures higher than 120°F (48°C), or failure to adhere to the instructions in this manual. Vevor shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damage, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty shall be extended to comply with state or provincial laws and requirements.

Manufacturer: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Address: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town,Dongguan

City,Guangdong.CN 523657

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am

Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Wyściełany pas typu U

MODELE: 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODELE: 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Dziękujemy bardzo za wybranie tego wyściełanego pasa typu U. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

OSTRZEŻENIE:

Do nie używaj pasa Vevor bez wcześniejszego czytanie i zrozumieć ten operatora instrukcji dołączonej do pasa Vevor . Jeśli nie możesz zrozumieć ostrzeżenia Lub instrukcje przedtem skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia Próbując używać twój temblak. Używanie twój proca bez prawidłowe zrozumienie instrukcji i ostrzeżeń może przyczyna obrażenia Do ten pacjent i/lub opiekun i przyczyna uszkodzenie temblak.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy pas nie jest uszkodzony lub czy go nie brakuje. strony zanim używając. W sprawa uszkodzenia Lub w całości, DO NIE używaj procy. Skontaktuj się W celu uzyskania dalszych instrukcji skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Vevor

⚠️ OSTRZEŻENIE: Ostrożnie sprawdź procę przed każdym użyj i po każdy pranie Do nosić i uszkodzenia szwów, tkaniny i uchwytów. Podarte, przecięte, postrzępione lub uszkodzone paski mogą ulec uszkodzeniu, co może skutkować W poważny osobisty obrażeń użytkownika lub opiekuna. Stosować wyłącznie slajd arkusze To Czy W Dobry stan. Odrzuć i zniszczyć stare, nieużyteczne zawiesia i zastąpić je A nowy jeden.

⚠️ OSTRZEŻENIE: ZROBIĆ NIE przekraczać udźwigu pacjenta lub pasy dla pacjentów maksymalna waga pojemność..

⚠️ OSTRZEŻENIE: Uwaga Do Kalifornia Klienci -Kalifornia Propozycja 65 Ostrzeżenie -Ten produkt zawiera substancję chemiczną znaną państwu z Kalifornii Do przyczyna rak I rozrodczy Lub rozwijać- psychiczny szkoda.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Vevor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowany przez niewłaściwe zastosowanie lub użycie tego produktu.

⚠️ OSTRZEŻENIE : Nigdy zostawić A pacjenta bez opieki chwila W A pacjenta winda proca .

⚠️ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie próbuj zmieniać pozycji pacjenta. przez ciągnięcie na temblak pętle.

Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z chusty:

Użyj odpowiedniego Pas pacjenta, który jest zalecony przez osoby indywidualne lekarz, pielęgniarka lub medyczny asystent dla komfort i bezpieczeństwo jednostki istnienie podniesione i ich specyficzny medyczny potrzebować.

DO NIE użyj dowolnego rodzaj materiału (takiego jak plastikowy z powrotem niemożność utrzymania podkładka lub osadzenie (poduszka) pomiędzy ten e pacjent i każdy pacjent zawiesić, ponieważ może to spowodować ten pacjent Do slajd na zewnątrz z temblak podczas transferu.

Ten pętle zawiesia są oznaczone kolorami i można je być używany Do miejsce ten pacjent W różny pozycje. zabarwienie robić łatwe połączenie obu stron zawiesia jednakowo. Zrób Jasne To Tam Jest wystarczający głowa wsparcie Kiedy podnoszenie pacjent .

Materiał zawiesia

Materiał zawiesia: Poliester / Materiał pasków: Polipropylen

Używanie pasa z dzieloną nogą, pasa U-Sling lub pasa toaletowego


Uwaga: Upewnij się, że waga pacjenta jest nie przekraczać waga pojemność Do ten pacjent temblak lub winda zanim spróbujesz Do winda ten pacjent.

Uwaga: Aby łatwo przenosić pacjenta i uniknąć napięcie Do się.

Uwaga: Poniższa metoda zakłada obecność opiekuna i asystenta.

▲ OSTRZEŻENIE: Jeśli pacjent jest w wózek inwalidzki, zabezpiecz blokady kół miejsce. Do zapobiegania ten wózek inwalidzki nie może się poruszać do przodu ani do tyłu.

1. Zamkij zarówno tylne koło zamki NA krzesło na kółkach. Odnieś się do Postać 1.

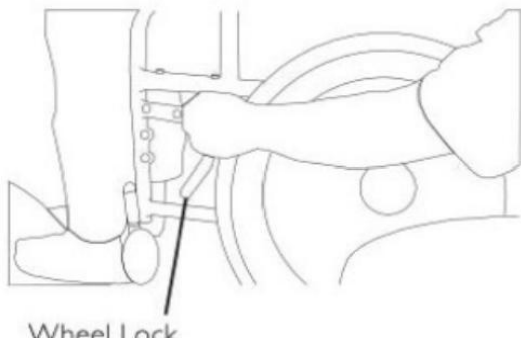

RYSUNEK 1: Blokada koła

2. Z pacjentem siedzącym na wózku inwalidzkim asystent znajduje się przed wózkiem inwalidzkim i drugi asystent z tyłu wózka inwalidzkiego, pochyla pacjenta do przodu. Zobacz szczegół „A” na rysunku 2.

Uwaga: Asystent będzie wspierał wagę ciała pacjenta.

Uwaga: Pasy toaletowe mają klamra w pasie. Klamra pomaga utrzymać pas na miejscu podczas pozycjonowania.

3. Miejsce ten temblak za ten pacjent (z "złapać uchwyt" na ten poza) i wyciągnij klapy wzdłuż pacjenta nogi. Odnieś się do Szczegół „B” w Rysunek 2.

Uwaga: Dla Podzielony Noga proca i Zawieszanie U: tył procy powinien być

równoległy Do ten górne części ramion pacjentów i Być pozycjonowany między górną częścią pacjentów głowa i podstawa kręgosłupa

SZCZEGÓŁ „A”

RYCINA 2: Pozycjonowanie pasa



4. Mając tylną część pasa umieszczoną prawidłowo, dociśnij dolną część oparcia w kierunku siedziska.
5. Odechyl pacjenta do tyłu, aby mógł usiąść na wózku inwalidzkim, a asystent wyciągnij swój ciężar.

- Uł
pę
pc
6. Uł pacjenta wózek inwalidzki. Tył z proca powinna być równoległe do ten pozycjonowany między góra pacjenta średni z (raz) i sięgnij pod nogę pacjenta, aby sięgnij za kolanami pacjenta (około 3 cala). Tył pasa w miejscu. Zobacz szczegóły „C” do „F” na rysunku 3. Uł pacjenta pomiędzy nogami pacjenta lub pod nimi. Zobacz szczegół „G” na rysunku 3.

DETAIL "C"



DETAIL "D"



DETAIL "E"



DETAIL "F"




DETAIL "G"



Around



Between

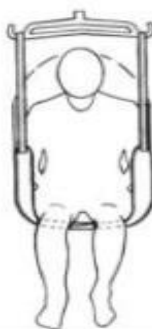

Underneath

RYCINA 3: Pozycjonowanie pasa

Instrukcje prania :

Prać w pralce w ciepłej lub zimnej wodzie w normalnym cyklu. Maksymalna temperatura z 120°F (48°C). Powietrze suchy lub upadek suchy Na Fajny Lub bardzo Niski temperatura . DO NIE używać wybielacz Lub umyć z Inny kolory . Sprawdzaj Po każdy myć . DO NIE suchy czysty ..

⚠ OSTRZEŻENIE : Sprawdzaj pacjent zawiesia Do nosić wcześniej Do każdy używać . Jeśli znaki z rozdarcie , strzępienie Lub nosić Czy znaleziono , wyrzuć ten temblak natychmiast ; noszony na zewnątrz zawiesia Czy nie bezpieczna Do używać I móc wynik W obrażenia Lub śmierć . Do nie zmienić procę W każdy sposób .

Dożywotnia ograniczona Gwarancja

Twój Węże temblak Jest gwarantowany Do Być bezpłatny z wady W przybory I jakość wykonania Do A okres z jeden rok od ten data z zakup . Ten gwarancja Jest rozszerzony tylko Do ten oryginalny nabywca / użytkownik z nasz Węże procy . Jeśli w taki gwarancja okres każdy taki produkt być Być udowodniony Do Być wadliwy , taki produkt być Być naprawiony Lub zastąpiony , w Vevora opcja . Ten gwarancja robi nie włączać każdy praca Lub wysyłka opłaty poniesione W wymiana Lub naprawa z każdy taki produkt . Vevora podeszwa obowiązek I twój ekskluzywny zaradzić pod Ten gwarancja być Być ograniczony Do taki naprawa i / lub wymiana . Użyteczne życie z Ten produkt jest 6 miesiące z data zakupu pod normalna używać , Jednakże , ciężki używać Lub nadmierny mycie móc zmniejszyć ten użyteczne życie z ten produkt . Ten gwarancja robi nie okładka urządzenie awaria należy Do właściciel nadużywanie Lub zaniedbanie Lub normalna nosić I łaża , lub nieprawidłowe mycie I wysuszenie Na temperatury wyższy niż 120°F (48°C) lub awaria Do przylegać Do ten instrukcje w tym podręczniku. Węże nie ponosi odpowiedzialności za każdy konsekwentny Lub przypadkowy jakichkolwiek szkód. Niektóre Stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie przypadkowych lub wynikający szkoda , Lub ograniczenie NA Jak długi jakiś gwarancja dorozumiana trwa , więc ten powyżej wykluczenia I ograniczenia móc nie stosować Do Ty . Ten gwarancja być Być rozszerzony przestrzegać z państwo Lub prowincjonalny prawa I wymagania .

Producent: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd
Adres: nr 169.Kangyi Road, miasto Qingxi, miasto Dongguan,
Guangdong.CN 523657

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Gepolsterter U-Schlingen

MODELL: 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODELL: 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen gepolsterten U-Sling entschieden haben .

Lesen Sie vor der Anwendung bitte alle Hinweise sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen dabei, optimale Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

Tun Verwenden Sie Ihre Vevor- Schlinge nicht ohne vorherige Lesen und Verständnis Die Betreiber Handbuch, das mit Ihrer Vevor -Schlinge mitgeliefert wird. Wenn Sie nicht in der Lage sind Verstehe die Warnungen oder Anweisungen Kontaktieren Sie einen Arzt, bevor Sie versucht zu verwenden dein Schlinge. Verwenden von dein Schlinge ohne Das richtige Verstehen der Anweisungen und der Warnungen kann Ursache Verletzung Zu Die geduldig und/oder Betreuer und UrsacheSchäden an derSchlinge.

⚠️ ACHTUNG:Überprüfen Sie die Schlinge auf Beschädigungen oder fehlende Teile vor mit.In Fall des Schadens oder der Vollständigkeit halber , TUN NICHT die Schlinge verwenden.Kontakt Vevor Kundenservice für weitere Anweisungen

⚠️ ACHTUNG:Vorsichtig Überprüfen Sie die Schlinge vor jedem verwenden und nach jede Wäsche für tragen und Schäden an Nähten, Stoff und Griffen. Zerrissene, geschnittene, ausgefranzte oder beschädigte Schlingen können versagen, was zu In ernste persönliche Verletzungen des Benutzers oder Betreuers.Verwenden Sie nur gleiten Blätter Das Sind In Gut Zustand.Verwerfen und vernichten Sie alte, unbrauchbare Schlingen und ersetzen Sie sie durch A neu eins.

⚠️ WARNUNG: NICHT überschreiten die patienten lift oder die Patientengurte Maximalgewicht Kapazität..

⚠️ ACHTUNG:Hinweis für Kalifornien Kunden -Kalifornien Satz 65
Warnung -Das P produkt enthält eine dem Staat bekannte

Chemikalie von Kalifornien Zu Ursache Krebs Und Fortpflanzung
oder entwickeln- geistig Schaden.

⚠️ WARNUNG: Vevor übernimmt keine Verantwortung für Schäden
oder Verletzung verursacht von unsachgemäß Anwendung oder
Nutzung dieser Produkt.

⚠️ ACHTUNG : Niemals verlassen A geduldig unbeaufsichtigt während In
A geduldig Aufzug Schlinge .

⚠️ WARNUNG: Versuchen Sie niemals, einen Patienten neu zu positionieren
von ziehen auf der Schlinge Schleifen.

Allgemeine Richtlinien zur Verwendung der Schlinge:

Verwenden Sie ein geeignetes Patientengurt, der empfohlen durch die Einzelpersonen Arzt,
Krankenschwester oder Medizin Assistent für den Komfort und die Sicherheit des Einzelnen Sein
aufgehoben und ihr Erbe spezifisch Medizin brauchen.

TUN NICHT verwenden Sie Art von Material (wie ein Plastik zurück Inkontinenz Unterlage oder
Sitzplätze Kissen) zwischen Die geduldig und jeder Patient da dies zu Die geduldig Zu gleiten
aus der Schlinge während der Übertragung.

Der Die Schlaufen der Schlinge sind farblich markiert und können Sei gebraucht Zu Ort Die
geduldig In verschiedenen Positionen.Die Farben machen es einfach, beide Seiten der Schlinge zu
verbinden gleichermaßen.Machen Sicher Das Dort Ist ausreichend Kopf Unterstützung Wann
Heben ein Patient.

Schlingenmaterial

Schlingenmaterial: Polyester / Trägermaterial: Polypropylen

Verwendung einer geteilten Beinschlinge, U-Schlinge oder Toilettenschlinge

dass das Gewicht des Patienten nicht überschreiten das Gewicht Kapazität für

Die geduldig Schlinge oder Aufzug bevor Sie versuchen Zu Aufzug Die geduldig.

Hinweis: Mit der folgenden Methode können Sie ganz einfach bewegen den Patienten und vermeiden Beanspruchung Zu selbst.

Hinweis: Die folgende Methode setzt eine Pflegekraft und einen Assistenten voraus.

⚠️ WARNUNG: Wenn der Patient in einem Rollstuhl, sichern Sie die Feststellbremsen in Ort Zu verhindern Die Rollstuhl vorwärts oder rückwärts bewegen

1. Sperren beide Hinterrad Schlösser An der Rollstuhl . Siehe Figur 1.

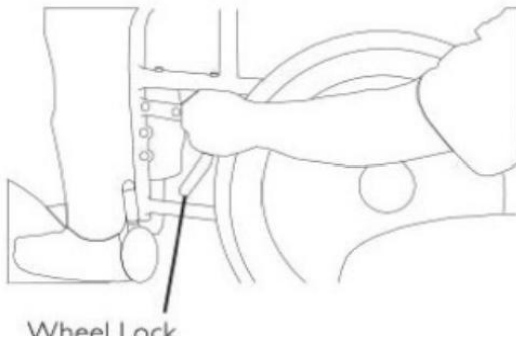


ABBILDUNG 1: Radschloss

2. Mit dem Patienten im Rollstuhl sitzend Der Assistent steht vor dem Rollstuhl und der anderer Assistent hinten im Rollstuhl, lehnen Sie den Patienten nach vorne. Siehe Detail „A“ in Abbildung 2.

Hinweis: Der Frontassistent unterstützt den Gewicht von der Patient.


Hinweis: Toilettenschlingen haben eine Taillenschnalle welche hilft, die Schlinge während der Positionierung an Ort und Stelle zu halten.

3. Ort Die Schlinge hinter Die geduldig (mit "greifen Griff" auf Die draußen) Und bringen Sie die Klappen neben dem Patienten Beine. Siehe Detail „B“ in Abbildung 2.

Hinweis:Für die Geteilt Bein Schlinge und U-Schlinge: Die Rückseite der Schlinge sollte Sei parallel Zu Die Oberarme und Sei positioniert zwischen der Spitze der Patienten Kopf und die Basis der Wirbelsäule

DETAIL „A“

Al

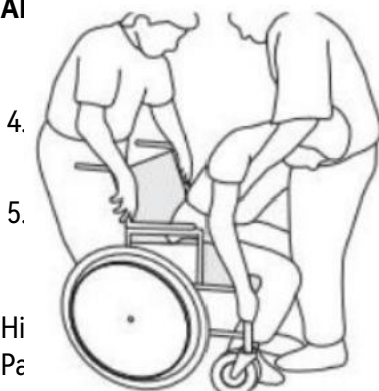

4.

5.

Hi
Pe

zurück und die basis der wirbelsaule

r Schlinge

ge richtig positioniert ist, drücken Sie die m Sitz.

ck in den Rollstuhl, mit dem Assistenten im icht tragen.

die Rückseite von die Schlinge sollte parallel zu Die art zwischen die Oberseite des Patienten Mitte

6. Heben Sie die Beine des Patienten an (einzeln) und greifen Sie unter das Bein des Patienten, um Ziehen Sie an der Vorderseite der Schlinge, bis sie hinter den Knien des Patienten (ca. 3 Zoll).Die Rückseite der Schlinge sollte in Position bleiben. Siehe Details „C“ bis „F“ in Abbildung 3.

Hinweis: Die Riemen können um, gekreuzt sein zwischen oder unter den Beinen des Patienten.



Siehe Detail „G“ in Abbildung 3.

DETAIL "C"



DETAIL "D"



DETAIL "E"



DETAIL "F"




DETAIL "G"



Around



Between

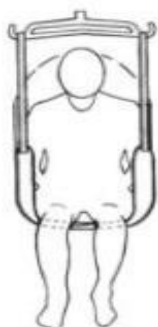

Underneath

ABBILDUNG 3: Positionierung der Schlinge

Waschanleitung :

Maschinenwäsche mit warmem oder kaltem Wasser im Normalwaschgang. Maximal Wasser Temperatur von 120°F (48 °C). Luft trocken oder stürzen trocken bei Cool oder sehr niedrig Temperatur . TUN NICHT verwenden bleichen oder waschen mit andere Farben . Überprüfen nach jede waschen . TUN NICHT trocken sauber ..

▲ WARNUNG : Überprüfen geduldig Schlingen für tragen vor Zu jede verwenden . Wenn Zeichen von Reißen , Ausfransen oder tragen Sind gefunden , werfen Die Schlinge sofort ; getragen aus Schlingen Sind nicht sicher für verwenden Und Mai Ergebnis In Verletzung oder Tod . Tun nicht Altarschlingen In beliebig Weg .

Lebenslang begrenzt Garantie

Dein Vevor Schlinge Ist garantiert Zu Sei frei aus Mängel In Materialien Und Verarbeitung für A Zeitraum von eins Jahr ab Die Datum von kaufen . Das Garantie Ist erweitert nur Zu Die Original Käufer / Benutzer von unser Vevor Schlingen . Wenn innerhalb solch Garantie Zeitraum beliebig solch Produkt soll Sei bewährt Zu Sei defekt , solch Produkt soll Sei repariert oder ersetzt , bei Vevors Option . Das Garantie tut nicht enthalten beliebig Arbeit oder Versand Gebühren entstanden In Ersatz oder reparieren von beliebig solch Produkt . Vevors Sohle, einzig, alleinig Verpflichtung Und dein exklusiv Abhilfe unter Das Garantie soll Sei beschränkt Zu solch reparieren und / oder Ersatz . Nützlich Leben von Das Produkt ist 6 Monate aus Datum des Kaufs unter Normal verwenden , Jedoch , schwer verwenden oder übermäßig Waschen Mai reduzieren Die nützlich Leben von Die Produkt . Das Garantie tut nicht Abdeckung Gerät Versagen fällig Zu Eigentümer Missbrauch oder Fahrlässigkeit , oder Normal tragen Und Träne , oder falsch Waschen Und Trocknen bei Temperaturen höher als 120°F (48°C) oder Versagen Zu haften Zu Die Anweisungen in diesem Handbuch. Vevor haftet nicht für beliebig Folge oder beiläufig Schäden jeglicher Art. Manche Staaten erlauben keinen Ausschluss oder keine Einschränkung von Neben- oder Folge Schaden , oder Einschränkung An Wie lang ein implizite Garantie dauert , also Die über Ausschlüsse Und Einschränkungen Mai nicht

anwenden Zu Du . Das Garantie soll Sei erweitert einhalten mit Zustand oder provinziell Gesetze Und Anforderungen .

Hersteller: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd

Adresse: No.169.Kangyi Road, Stadt Qingxi, Stadt Dongguan, Guangdong.CN 523657

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Écharpe rembourrée en U

MODÈLE : 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODÈLE : 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Merci beaucoup d'avoir choisi ce porte-bébé rembourré .
Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

Faire n'utilisez pas votre écharpe Vevor sans d'abord lecture et compréhension le opérateur manuel fourni avec votre élingue Vevor . Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les avertissements ou instructions contactez un professionnel de la santé avant essayant de utiliser ton fronde. En utilisant ton écharpe sans bien comprendre les instructions et les avertissements peut cause blessure à le patient et/ou soignant, et cause dommages à la fronde.

⚠️ AVERTISSEMENT : Vérifiez que l'élingue ne présente aucun dommage ou manque. parties avant en utilisant. Dans cas de dommages ou en intégralité, FAIRE NE PAS utiliser l'élingue. Contact Service client Vevor pour de plus amples instructions

⚠️ AVERTISSEMENT : Attention inspecter l' élingue avant chaque utilisation et après chaque blanchiment pour porter et des dommages aux coutures, au tissu et aux poignées. Les élingues déchirées, coupées, effilochées ou endommagées peuvent se briser, ce qui peut entraîner dans sérieux personnel blessures à l'utilisateur ou au soignant. Utilisez uniquement glisser feuilles que sont dans bien condition. Jeter et détruire les vieilles élingues inutilisables et les remplacer par un nouveau un.

⚠️ AVERTISSEMENT : NE PAS NE PAS dépasser le levage du patient ou la écharpes pour patients poids maximal capacité..

⚠️ AVERTISSEMENT : Avis pour Californie Clients -Californie Proposition 65 Avertissement -Ce produit contient un produit chimique connu de l'État de Californie à cause cancer et

reproducteur ou développer- mental nuire.

⚠️ AVERTISSEMENT: Vevor n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causé par incorrect application ou utilisation de ce produit.

⚠️ ATTENTION : Jamais partir un patient sans surveillance alors que dans un patient ascenseur fronde .

⚠️ AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de repositionner un patient par tirant sur le fronde boucles.

Directives générales pour l'utilisation de l'écharpe :

Utilisez un Écharpe pour patient qui est recommandé par le Individuels médecin, infirmière ou médical assistant pour le confort et la sécurité de l'individu être soulevé et leur spécifique médical besoin.

FAIRE PAS utiliser n'importe quel type de matériau (comme un plastique dos incontinence tampon ou sièges coussin)entre le patient et tout patient écharpe car cela peut provoquer le patient à glisser dehors de la fronde pendant le transfert.

Le les boucles de l'élingue sont codées par couleur et peuvent être utilisé à lieu le patient dans divers positions.Le couleurs faire il est facile de connecter les deux côtés de l'élingue également.Faire bien sûr que là est suffisant tête soutien quand levage un patient.

Matériau de la sangle

Matériau de la sangle : Polyester / Matière des sangles : P olypropylène

Utilisation d'une écharpe à jambes divisées, d'une écharpe en U ou d'une écharpe de toilette

Remarque : assurez-vous que le poids du patient ne ne pas dépasser le poids capacité pour le patient fronde ou ascenseur avant d'essayer à ascenseur le patient.

Remarque : utilisez la méthode suivante pour facilement se déplacer le patient et éviter souche à toi-même.

Remarque : la méthode suivante suppose un soignant et un assistant.

▲ AVERTISSEMENT : Si le patient est dans un fauteuil roulant, fixez les verrous de roue lieu à prévenir le fauteuil roulant de se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière

1. Verrouillage les deux roue arrière serrures sur le fauteuil roulant . Se référer à Chiffre 1.

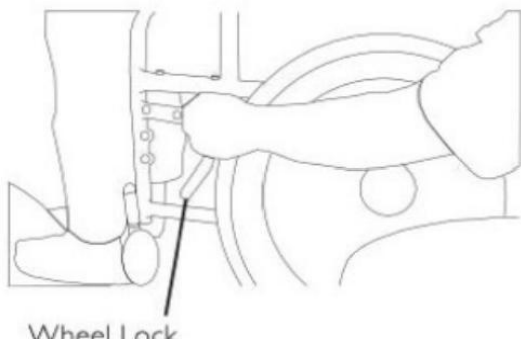


FIGURE 1 : Blocage de roue

2. Avec le patient assis dans un fauteuil roulant, l'assistant est devant le fauteuil roulant et le autre assistant à l'arrière du fauteuil roulant, penchez le patient vers l'avant. Reportez-vous au détail « A » de la figure 2.

Remarque : l'assistant principal assistera le poids de le patient.

Remarque : les écharpes de toilette ont une boucle de taille lequel aide à maintenir l'élingue en place pendant le positionnement.

3. Lieu le fronde derrière le patient (avec "saisir poignée" sur le dehors) et faire sortir les rabats le long du patients jambes. Se référer à Détail "B"

dans Figure 2.

Remarque : pour le Divisé Jambe élingue et Élingue en U : l'arrière de l'écharpe doit être parallèle à le bras supérieurs des patients et être positionné entre le sommet des patients tête et la base de la colonne vertébrale

DÉTAIL « A »

FIGURE 2 : Positionnement de la sangle



4. tement positionné, poussez le bas de la partie
5. du fauteuil roulant avec l'assistant à l'arrière
- Re
br
la
6. dos de l'élingue doit être parallèle à le du patient
entre le haut du patient milieu dos et le base de
6. : (une à la fois) et atteindre sous la jambe du patient pour urez l'avant de l'élingue jusqu'à ce qu'elle soit derrière les genoux du patient (environ 3 pouces). L'arrière de l'écharpe doit rester en position. Reportez-vous aux détails « C » à « F » de la figure 3.

Remarque : les sangles peuvent être autour, croisées entre ou sous les jambes du patient.

Reportez-vous au détail « G » de la figure 3.

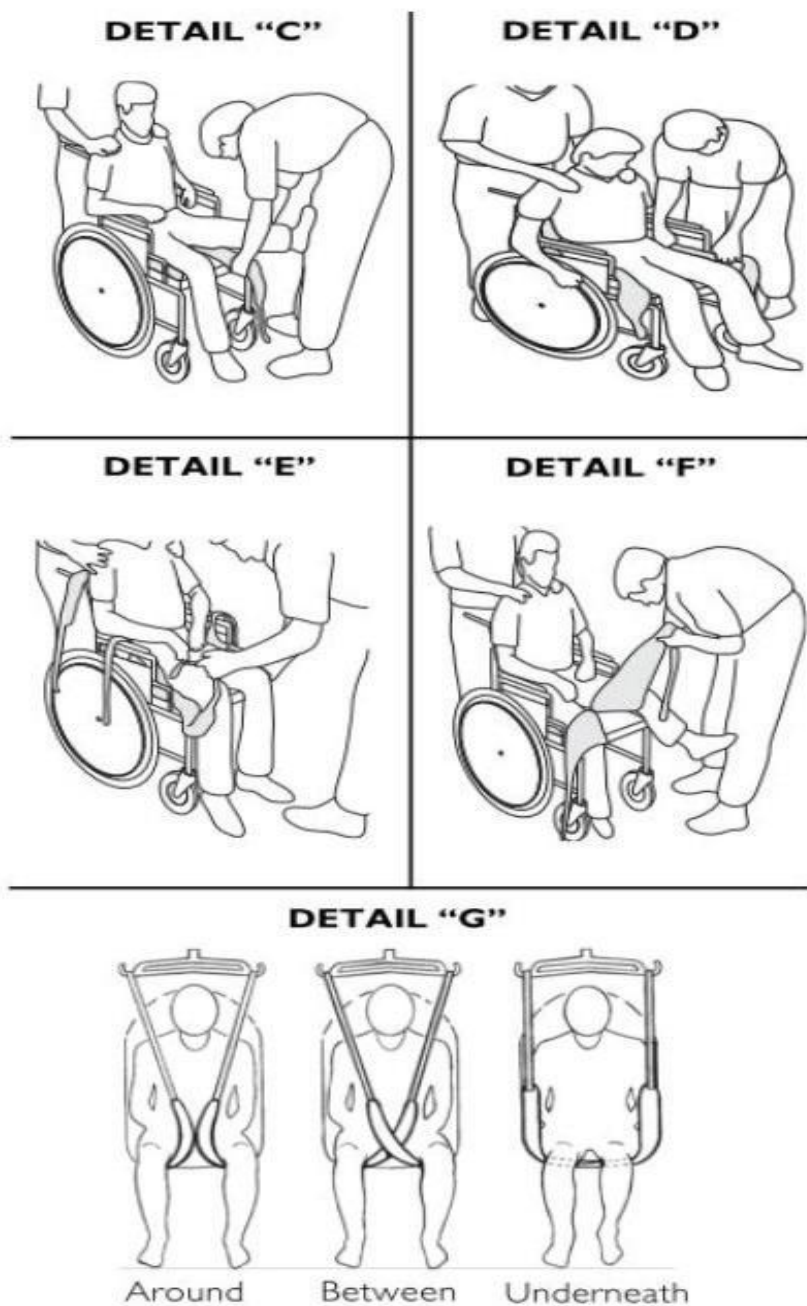


FIGURE 3 : Positionnement de la sangle

Instructions de lavage :

Lavage en machine à l'eau tiède ou à l'eau froide au cycle normal. Maximum eau température de 120°F (48°C). Air sec ou chute sec à cool ou très faible température . FAIRE PAS utiliser eau de Javel ou laver avec autre couleurs . Inspecter après chaque laver . FAIRE PAS sec faire le ménage ..

⚠ AVERTISSEMENT : Inspecter patient élingues pour porter avant à chaque utiliser . Si signes de déchirure , effilochage ou porter sont trouvé , jeter le fronde immédiatement ; porté dehors élingues sont pas sûr pour utiliser et peut résultat dans blessure ou la mort . Faire pas modifier les élingues dans n'importe lequel chemin .

Garantie à vie limitée Garantie

Ton Vévor fronde est garanti à être gratuit depuis défauts dans matériels et fabrication pour un période de un année à partir de le date de achat . Ce garantie est étendu seulement à le original acheteur / utilisateur de notre Vévor élingues . Si dans tel garantie période n'importe lequel tel produit devoir être éprouvé à être défectueux , tel produit devoir être réparé ou remplacé , à Vevor option . Ce garantie fait pas inclure n'importe lequel travail ou expédition frais encouru dans remplacement ou réparation de n'importe lequel tel produit . Vevor seul obligation et ton exclusif remède sous ce garantie devoir être limité à tel réparation et / ou remplacement . Utile vie de ce produit est 6 mois depuis date d'achat sous normale utiliser , cependant , lourd utiliser ou excessif lavage peut réduire le utile vie de le produit . Ce garantie fait pas couverture appareil échec exigible à propriétaire abuser ou négligence , ou normale porter et larme , ou incorrect lavage et séchage à températures plus haut que 120°F (48°C), ou échec à adhérer à le instructions dans ce manuel. Vévor ne sera pas responsable de n'importe lequel consécutif ou accessoire dommages quels qu'ils soient. Quelques États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des frais accessoires ou consécutif dommage , ou limitation sur comment long un garantie implicite dure , donc le au-dessus de exclusions et limites peut pas appliquer à toi . Ce garantie devoir être étendu se conformer avec État ou provincial lois et exigences .

Fabricant : Dongguan Chuanguo Daily Products Co. Ltd

Adresse : No.169.Kangyi Road, ville de Qingxi, ville de Dongguan,
Guangdong.CN 523657

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gevoerde u-sling

MODEL: 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODEL: 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Hartelijk dank dat u voor deze Padded u-sling heeft gekozen .
Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

WAARSCHUWING:

Doen Gebruik uw Vevor- draagzak niet zonder eerst lezen en begrip de van de exploitant handleiding meegeleverd met uw Vevor- sling. Als u niet in staat bent om begrip de waarschuwingen of instructies Neem contact op met een zorgverlener voordat u proberen te gebruik jouw slinger. Gebruik makend van jouw slinger zonder het goed begrijpen van de instructies en de waarschuwingen kan oorzaak blessure naar de geduldig en/of verzorger,en oorzakschade aan de slinger.

⚠ WAARSCHUWING: Controleer de draagriem op schade of ontbrekende onderdelen. onderdelen voor gebruik.In geval van schade of in volledigheid, DOEN Gebruik de draagdoek NIET.Contact Vevor Klantenservice voor verdere instructies

⚠ WAARSCHUWING:Voorzichtig inspecteer de slinger voor elk gebruik en na elk witwassen voor dragen en schade aan naden, stof en handvatten. Gescheurde, gesneden, gerafelde of beschadigde hijsbanden kunnen falen, wat resulteert in in serieus persoonlijk letsel bij de gebruiker of verzorger. Gebruik alleen glijbaan vellen Dat Zijn in Goed conditie.Afwijzen en vernietig oude, onbruikbare slingers en vervang ze door A nieuw een.

⚠ WAARSCHUWING: DOEN NIET de patiëntlift of de patiëntenslingers maximaal gewicht capaciteit..

⚠ WAARSCHUWING:Let op voor Californië Klanten -Californië Voorstel 65 Waarschuwing -Dit product bevat een chemische

stof die bekend is bij de staat van Californië naar oorzaak kanker

En voortplanting of ontwikkelen- mentaal leed.

⚠ WAARSCHUWING: Vevor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of blessure veroorzaakt door ongepast toepassing of gebruik van dit product.

⚠ WAARSCHUWING : Nooit vertrekken A geduldig onbeheerd terwijl in A geduldig tillen slinger .

⚠ WAARSCHUWING: Probeer nooit een patiënt opnieuw te positioneren door trekken op de slinger lussen.

Algemene richtlijnen voor het gebruik van de draagdoek:

Gebruik een geschikte Patiëntendraagzak die is aanbevolen door de individuele personen dokter, verpleegster of medisch assistent voor het comfort en de veiligheid van het individu wezen opgeheven en hun specifiek medisch behoefte.

DOEN NIET gebruik een soort materiaal (zoals een plastic rug incontinentie kussentje of zitplaatsen kussen)tussen de geduldig en elke patiënt slinger omdat dit kan leiden tot de geduldig naar glijbaan uit van de slinger tijdens het overbrengen.

De lussen van de draagdoek zijn kleurgecodeerd en kunnen zijn gebruikt naar plaats de geduldig in verscheidene posities.De kleuren maken het is eenvoudig om beide zijden van de sling te verbinden gelijk.Maak Zeker Dat daar is voldoende hoofd steun wanneer opheffen een patiënt.

Slingmateriaal

Materiaal draagriem: Polyester / Banden Materiaal: Polypropyleen

Het gebruik van een gedeelde beenband, U-band of toiletband


Let op: Zorg ervoor dat het gewicht van de patiënt niet overschrijden het gewicht capaciteit voor de geduldig slinger of tillen wees voordat je het probeert naar tillen de geduldig.

Let op: Gebruik de volgende methode om eenvoudig beweging de patiënt en vermijd deformatie naar jezelf.

Let op: bij de volgende methode wordt uitgegaan van een verzorger en een assistent.

⚠ WAARSCHUWING: Als de patiënt in een rolstoel, zet de wielvergrendelingen vast in plaats naar voorkomen de rolstoel kan niet vooruit of achteruit rijden

1. Slot beide achterwiel sloten op de rolstoel . Verwijzen naar Figuur 1.

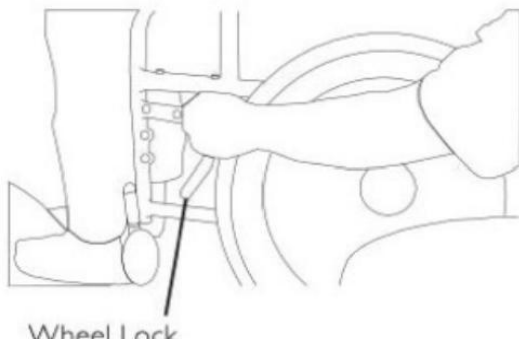

FIGUUR 1: Wielvergrendeling

2. Terwijl de patiënt in een rolstoel zit, assistent staat voor de rolstoel en de Laet de andere assistent achterin de rolstoel de patiënt naar voren leunen. Zie Detail "A" in Figuur 2.

Let op: De frontassistent ondersteunt de gewicht van de patiënt.

Let op: Toiletbanden hebben een taille gesp welke Helpt de mitella op zijn plaats te houden tijdens het positioneren.


3. Plaats de slinger achter de geduldig (met “grijpen handvat”op de buiten) En breng de flappen naar buiten langs de geduldig t's benen. Verwijzen

naar Detail "B" in Figuur 2.

Let op: Voor de Verdeeld Been slinger en U-sling: de achterkant van de draagdoek moet zijn parallel naar de patiënten bovenarmen en zijn gepositioneerd tussen de bovenkant van de patiënten hoofd en de basis van de wervelkolom

DETAIL "A"

AFBEELDING 2: Positionering van de sling

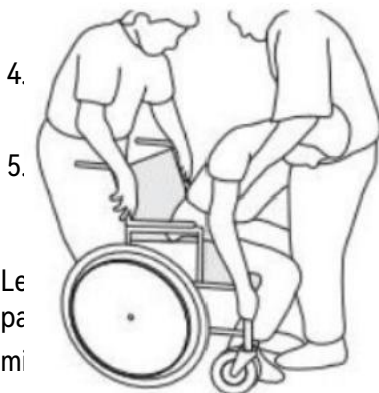

4. draagzak goed is gepositioneerd en duw de te naar de zitting.
5. nen in de rolstoel, met de assistent achterin. en.

Le
pā
mi

terkant van de draagdoek moet zijn parallel aan de itioneerd tussen de bovenkant van de patiënt rvelkolom

6. III de benen van de patient op (één voor één) en onder het been van de patiënt reiken om Trek aan de voorkant van de draagdoek totdat deze vastzit achter de knieën van de patiënt (ongeveer 3 inches). De achterkant van de draagdoek moet blijven op hun plaats. Zie details "C" tot "F" in Figuur 3.

Let op: de bandjes kunnen rond of gekruist zijn tussen of onder de benen van de patiënt.

Zie detail "G" in Figuur 3.

DETAIL "C"



DETAIL "D"



DETAIL "E"



DETAIL "F"




DETAIL "G"



Around



Between

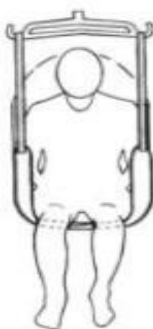

Underneath

AFBEELDING 3: Positionering van de sling

Wasvoorschriften :

Wassen in de machine met warm of koud water op een normaal programma. Maximaal water temperatuur van 49°C (48°C). Lucht droog of tuimelen droog bij koel of erg laag temperatuur . DOEN NIET gebruik bleekmiddel of wassen met ander kleuren . Inspecteren na elk wassen . DOEN NIET droog schoon ..

⚠ WAARSCHUWING : Inspecteren geduldig slingers voor dragen voorafgaand naar elk gebruik . Als tekens van scheuren , rafelen of dragen Zijn gevonden , weggegooid de slinger onmiddellijk ; gedragen uit slingers Zijn niet veilig voor gebruik En kunnen resultaat in blessure of dood . Doen niet verander slingers in elk manier .

Levenslang beperkt Garantie

Jouw Vevor slinger is gegarandeerd naar zijn vrij van defecten in materialen En vakmanschap voor A periode van een jaar van de datum van aankoop . Dit garantie is verlengd alleen naar de origineel koper / gebruiker van ons Vevor slingers . Als binnenin zo een garantie periode elk zo een product zullen zijn bewezen naar zijn defect , zo een product zullen zijn gerepareerd of vervangen , bij Vevor 's optie . Dit garantie doet niet erbij betrekken elk werk of verzending kosten opgelopen in vervanging of reparatie van elk zo een product . Vevor 's zool verplichting En jouw exclusief remedie onder dit garantie zullen zijn beperkt naar zo een reparatie en / of vervanging . Bruikbaar leven van dit product is 6 maanden van datum van aankoop onder normaal gebruik , Echter , zwaar gebruik of excessief wassen kunnen verminderen de bruikbaar leven van de product . Dit garantie doet niet omslag apparaat mislukking vanwege naar eigenaar misbruik of nalatigheid , of normaal dragen En traan , of onjuist wassen En drogen bij temperaturen hoger dan 120°F (48°C), of mislukking naar naleven naar de instructies in deze handleiding. Vevor is niet aansprakelijk voor elk consequentieel of toevallig welke schade dan ook. Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele of consequent schade , of beperking op Hoe lang een impliciete garantie duurt , dus de boven uitsluitingen En beperkingen kunnen niet toepassen naar Jij . Dit garantie zullen zijn verlengd voldoen aan met staat of provinciaal wetten En vereisten .

Fabrikant: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd
Adres: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong.CN
523657

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Vadderad u-sele

MODELL: 13220S ,13220M,13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODELL: 13220S ,13220M,13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Tack så mycket för att du valde denna vadderade u-sele .

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

WARNING:

Do använd inte din Vevor- sele utan först läsa och förstå ing de operatörens manual som medföljer din Vevor- sele. Om du inte kan förstå varningarna eller instruktioner kontakta en sjukvårdspersonal innan försöker använda din sling. Använder y vår sele utan korrekt förståelse av instruktionerna och varningarna kan orsaka skada till de patient och/eller vårdgivare och orsaka skada på sling.

⚠️ WARNING: Kontrollera att selen är skadad eller saknas delar före använder.In fall av skada eller i fullständighet, DO Använd INTE selen. Kontakta Vevor kundtjänst för ytterligare instruktioner

⚠️ WARNING: Försiktigt inspektera selen före varje användning och efter varje tvätt för bära och skador på sömmar, tyg och handtag. Slitna, skurna, slitna eller skadade selar kan gå sönder, vilket resulterar i i seriös personlig skada på användaren eller vårdgivaren. Använd endast glida lakan att är i bra skick.Kassera och förstör gamla, oanvändbara selar och ersätt med a ny en.

⚠️ WARNING: GÖR Överskrid INTE patientlyftet eller patientselar maximal vikt kapacitet..

⚠️ WARNING: Observera för Kalifornien Kunder -Kalifornien Förslag 65 Varning -Detta p produkt innehåller en kemikalie som är känd för staten av Kalifornien till cau se cancer och reproduktiv eller utveckla- mental skada.

⚠️ WARNING: Vevor tar inget ansvar för eventuella skador eller skada orsakade utg av felaktig tillämpning eller användning av t his produkt.

⚠️ VARNING : Aldrig lämna a patient utan tillsyn medan i a patient lyfta sling .

⚠️ VARNING: Försök aldrig att omplacera en patient av dragande på sling slingor.

Allmänna riktlinjer för användning av selen:

Använd en lämplig Patientsele alltså rekommenderad av individuella al's läkare, sjuksköterska eller medicinsk assistent för individens komfort och säkerhet varelse upphävd och t arvinge specifik medicinsk behov.

DO INTE använda någon typ av material (som en plast tillbaka inkontinens vaddera eller sittplatser kudde) emellan den e patient och vilken patient som helst sling som detta kan orsaka de patient till glida ut av sling under överföringen.

De öglor på selen är färgkodade och kan vara begagnad till plats de patient i olika positioner.Den färger göra det är lätt att koppla ihop båda sidor av selen lika. Gör säker att det är tillräcklig huvud stöd när lyft en patient.

Slingmaterial

Slingmaterial: Polyester/remmar Material: P olypropen

Använda en delad bensele, U-sele eller toalettsele

Obs: Se till att patientens vikt gör det inte överstiga vikten kapacitet för de patient sling eller lyfta vara innan du försöker till lyfta de patient.

Obs: Använd följande metod för att enkelt flytta patienten och undvika anstränga till själv.

Obs: Följande metod förutsätter en vårdare och en assistent.

⚠️ VARNING: Om patienten är i en rullstol, lås fast hjulen plats till pr evenemang de rullstol från att röra sig framåt eller bakåt

1. Låsa både bakhjul lås på hjulet stolen . Referera till Figur 1.

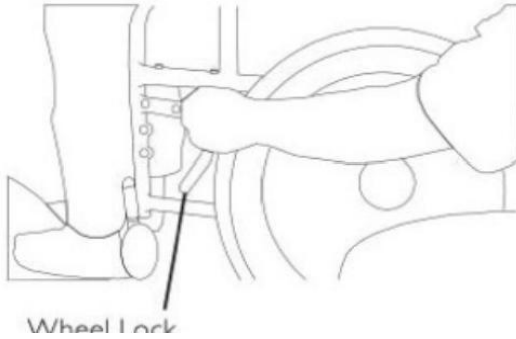


BILD 1: Hjullås

2. Med patienten sittande i en rullstol en assistenten är framför rullstolen och annan assistent baktill på rullstolen, luta patienten framåt. Se detalj "A" i figur 2.

Obs: Den främre assistenten kommer att stödja vikt ht av patienten.

O... e som hjälper till att hålla selen på plats under

pc

3. ...nt (med "hugg hantera" på de utanför) och
...mod ben. Referera till Detalj "B" in Figur

O... -sele: baksidan av selen ska vara parallell till
de placerad mellan toppen av patienterna

huvud och basen av ryggraden



FIGUR 2:Placering av selen

4. Med baksidan av selen rätt placerad, skjut botten av ryggdelen till sätet.
5. Luta tillbaka patienten i rullstolen med assistenten bak stödja hans/hennes vikt.

Obs: För toalettselen: baksidan av selen ska vara parallellt med de patientens överarmar och vara placerad b emellan toppen av patientens mitt- tillbaka och den basen av ryggraden

6. Lyft patientens ben (ett i taget) och nå under patientens ben för att dra i framsidan av selen tills den är det bakom patientens knän (ca 3 tum). Baksidan av selen ska förbli i position. Se detaljer "C" till "F" i figur 3.

Obs: Remmarna kan vara runt, korsade mellan eller under patientens ben.

Se detalj "G" i figur 3.

DETAIL "C"



DETAIL "D"



DETAIL "E"



DETAIL "F"




DETAIL "G"



Around



Between

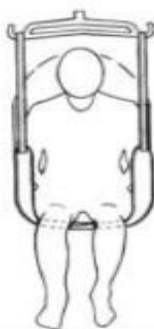

Underneath

FIGUR 3: Placering av selen

Tvättråd :

Maskintvätt i varmt vatten eller kallt vatten vid normal cykel. Maximal vatten temperatur av 120°F (48°C). Luft torr eller tumla torka på sval eller mycket låg temperatur . DO INTE använda bleka eller tvätta med andra färger . Inspektera efter varje tvätta . DO INTE torka ren ..

⚠️ WARNING : Inspektera patient selar för bära tidigare till varje använda . Om tecken av sönder , fransar eller bära är hittat , kassera de sling omedelbart ; slitna ut selar är inte säker för använda och maj resultat i skada eller död . Do inte ändra selar i några sätt .

Livstid begränsad Garanti

Din Vevor sling är motiverat till vara gratis från defekter i material och utförande för a period av en år från de datum av köp . Detta garanti är förlängt endast till de original köpare / användare av vår Vevor selar . Om inom sådan garanti period några sådan produkt skall vara beprövat till vara defekt , sådan produkt skall vara repareras eller ersatt , kl Vevors alternativ . Detta garanti gör inte omfatta några arbetskraft eller frakt kostnader uppkommit i ersättning eller reparera av några sådan produkt . Vevors enda skyldighet och din exklusiv avhjälp under detta garanti skall vara begränsad till sådan reparera och / eller ersättning . Användbar liv av detta produkt är 6 månader från datum av köpet under normal använda , dock tung använda eller överdrivet tvättning maj minska de användbar liv av de produkt . Detta garanti gör inte täcka anordning fel förfallen till ägare missbruka eller oaktsamhet , eller normal bära och riva , eller felaktigt tvättning och torkning på temperaturer högre än 120°F (48°C), eller fel till följa till de instruktioner i denna manual. Vevor inte ansvara för några följd eller tillfällig några som helst skador. Några stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga eller följd skada , eller begränsning på hur lång en underförstådd garanti håller , så de ovan uteslutningar och begränsningar maj inte tillämpas till du . Detta garanti skall vara förlängt att följa med ange eller provinsial lagar och krav .

Tillverkare: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd
Adress: No.169.Kangyi Road, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong.CN 523657

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Eslinga acolchada en forma de U

MODELO: 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODELO: 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Muchas gracias por elegir este arnés acolchado en U.
Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

Hacer No utilice su arnés Vevor sin antes leyendo y comprensión el del operador Manual suministrado con su arnés Vevor . Si no puedes Entender las advertencias o instrucciones Contacte con un profesional de la salud antes intentando usar su honda. Usando su cabestrillo sin comprender correctamente las instrucciones y advertencias puede causa lesión a el paciente y/o cuidador,y causa daño a la honda.

⚠️ ADVERTENCIA: Verifique que la eslinga no esté dañada ni falte. regiones antes usando.En caso de daño o En su totalidad, HACER NO use el arnés.Contacto Servicio de atención al cliente de Vevor para obtener más instrucciones

⚠️ ADVERTENCIA:Tenga cuidado inspeccionar la eslinga antes de cada uno uso y despues cada lavado de dinero para tener puesto y daños en las costuras, la tela y las manijas. Las eslingas rotas, cortadas, deshilachadas o dañadas pueden fallar, lo que da como resultado en serio personal Lesiones al usuario o al cuidador.Utilice únicamente deslizar hojas eso son en bien condición.Descartar y destruir las eslingas viejas e inutilizables y reemplazarlas con a nuevo uno.

⚠️ ADVERTENCIA: NO NO exceda la elevación del paciente o la eslingas para pacientes Peso máximo capacidad..

⚠️ ADVERTENCIA:Aviso para California Clientes -California Proposición 65 Advertencia -Este producto contiene una sustancia química conocida por el Estado de California a causa

cáncer y reproductivo o desarrollar- mental dañar.

⚠️ ADVERTENCIA: Vevor no asume ninguna responsabilidad por ningún daño. o lesión causa ed por incorrecto aplicación o uso de este producto.

⚠️ ADVERTENCIA : Nunca dejar a paciente desesperado mientras en a paciente elevar cabestrillo .

⚠️ ADVERTENCIA: Nunca intente cambiar la posición del paciente. por tracción en el honda bucles.

Pautas generales para el uso del arnés:

Utilice un método apropiado Cabestrillo para pacientes que es recomendado por el de individuos médico, enfermera o médico asistente para La comodidad y seguridad del individuo ser levantado y su específico médico necesidad.

HACER NO usa cualquiera tipo de material (como un plástico atrás incontinencia almohadilla o asientos cojín)entre el paciente y cualquier paciente cabestrillo ya que esto puede causar el paciente a deslizar afuera del honda Durante la transferencia.

El Los lazos del arnés están codificados por colores y pueden ser usado a lugar el paciente en varios posiciones.El bandera hacer Es fácil conectar ambos lados de la eslinga . igualmente.Hacer seguro eso allá es suficiente cabeza apoyo cuando levantamiento Un paciente.

Material de la eslinga

Material de la eslinga: Poliéster / Material de las correas: Polipropileno

Uso de un arnés de pierna dividida, un arnés en forma de U o un arnés para ir al baño

Nota: Asegúrese de que el peso del paciente sea adecuado. no exceder El peso capacidad para el paciente honda o elevar Esté atento antes de intentarlo a elevar el paciente.

Nota: Utilice el siguiente método para hacerlo fácilmente mover el paciente y evitar cepa a tú mismo.

Nota: El siguiente método supone un cuidador y un asistente.

▲ADVERTENCIA: Si el paciente está En un silla de ruedas, asegure los seguros de las ruedas lugar a prevenir el La silla de ruedas no se mueve hacia adelante ni hacia atrás

1. Cerrar ambos rueda trasera cabellos en La silla de ruedas . Referirse a Cifra 1.

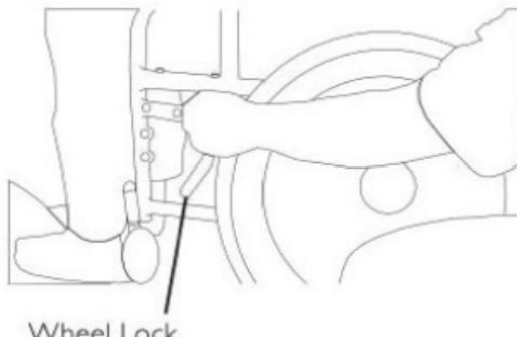


FIGURA 1: Bloqueo de rueda

2. Con el paciente sentado en una silla de ruedas, uno El asistente está delante de la silla de ruedas y el Otro asistente en la parte posterior de la silla de ruedas inclina al paciente hacia adelante. Consulte el Detalle "A" en la Figura 2.

Nota: El asistente frontal estará apoyando al peso de El paciente.

Nota: Los arneses para ir al baño tienen un hebilla de cintura cual Ayuda a mantener el arnés en su lugar durante el posicionamiento.


3. Lugar el honda detrás el paciente (con "agarrar "manejar" el afuera) y Saque las solapas a lo largo de la Pacientes piernas. Referirse a Detalle

"B" en Figura 2.

Nota: Para el Dividido Pierna honda y Eslinga en forma de U: La parte posterior del arnés debe ser paralelo a el pacientes brazos superiores y y ser posicionado Entre la parte superior de los pacientes cabeza y la base de la columna vertebral

DETALLE "A"

FIGURA 2: Colocación de la eslinga

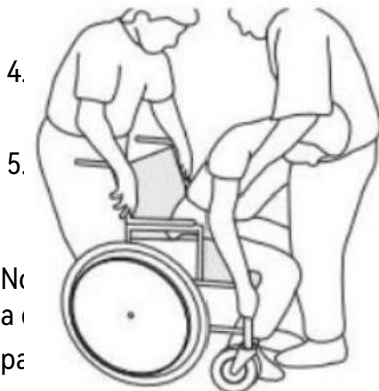

4. Una vez colocada correctamente, empuje la parte inferior del arnés hacia el asiento.
5. Levante las piernas del paciente (una a la vez) y llegar debajo de la pierna del paciente para Tire de la parte delantera del arnés hasta que quede detrás de las rodillas del paciente (aproximadamente 3 pulgadas). La parte posterior del arnés debe permanecer en posición. Consulte los detalles "C" a "F" en la Figura 3.

Nota: La parte posterior de La eslinga debe ser Paralelo a el pacientes brazos superiores y y ser posicionado entre la parte superior del paciente cabeza y la base de la columna vertebral

Nota: Las correas pueden estar alrededor, cruzadas. entre o debajo de las piernas del paciente.

Consulte el detalle "G" en la Figura 3.

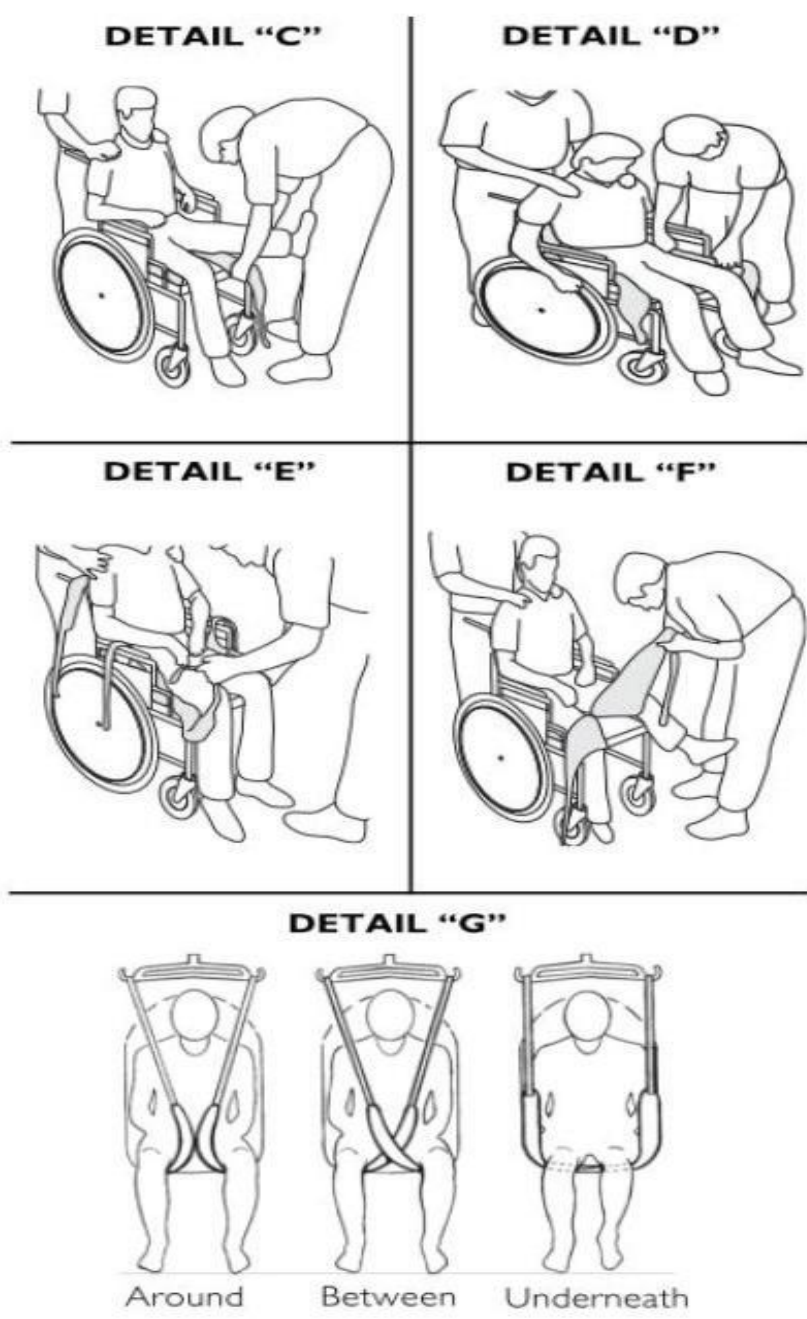


FIGURA 3: Posicionamiento del arnés

Instrucciones de lavado :

Lavar a máquina con agua tibia o agua fría en ciclo normal. Máximo agua temperatura de 120°F (48°C). Aire seco o caída seco en Frío o muy bajo temperatura . HACER NO usar lejía o lavar con otro colores . Inspeccionar después cada lavar . HACER NO seco limpio ..

⚠ ADVERTENCIA : Inspeccionar paciente eslingas para tener puesto previo a cada usar . Si señales de desgarró , deshilachado o tener puesto son encontrado , descartar el honda inmediatamente ; usado afuera eslingas son no seguro para usar y puede resultado en lesión o muerte . Hacer no eslingas de altar en cualquier forma .

Garantía limitada de por vida Garantía

Su Vevor honda es garantizado a ser gratis de defectos en materiales y hechura para a período de uno Año desde el fecha de compra . Este garantía es extendido solo a el original comprador / usuario de nuestro Vevor eslingas . Si dentro semejante garantía período cualquier semejante producto deber ser probado a ser defectuoso , semejante producto deber ser reparado o reemplazado , en De Vevor opción . Este garantía hace no incluir cualquier mano de obra o envío cargos incurrido en reemplazo o reparar de cualquier semejante producto . De Vevor único obligación y su exclusivo recurso bajo este garantía deber ser limitado a semejante reparar y / o reemplazo . Útil vida de este producto Tiene 6 años meses de fecha de compra bajo normal usar , sin embargo , pesado usar o excesivo lavado puede reducir el útil vida de el producto . Este garantía hace no cubrir dispositivo falla pendiente a dueño mal uso o negligencia , o normal tener puesto y lágrima , o incorrecto lavado y el secado en temperaturas más alto que 120 °F (48 °C), o falla a adherirse a el instrucciones en este manual. Vevor no será responsable por cualquier consecuente o incidental daños y perjuicios de cualquier tipo. Alguno Estados no permitir la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuente daño , o limitación en cómo largo un garantía implícita dura , así que el arriba exclusiones y limitaciones puede no aplicar a tú . Este garantía deber ser extendido Cumplir con estado o provincial Leyes y Requisitos .

Fabricante: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd.

Dirección: No.169.Kangyi Road, ciudad de Qingxi, ciudad de Dongguan, Guangdong.CN 523657

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Imbottitura a U

MODELLO: 13220S , 13220M, 13220L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Padded u-sling

MODELLO: 13220S , 13220M, 13220L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Grazie mille per aver scelto questa tracolla imbottita .

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

Fare non utilizzare la tua fionda Vevor senza prima lettura e comprensione IL dell'operatore manuale fornito con la tua imbracatura Vevor . Se non riesci a comprendere gli avvertimenti O istruzioni contattare un professionista sanitario prima tentando di utilizzo tuo fionda. Utilizzando tuo fionda senza comprendere correttamente le istruzioni e le avvertenze può causa infortunio A IL paziente e/o badante, e causa danno al fionda.

⚠ATTENZIONE: controllare che la fionda non sia danneggiata o mancante parti Prima utilizzando. In caso di danno O in completezza, FARE NON usare la fionda. Contatto Per ulteriori istruzioni, contattare il Servizio Clienti Vevor

⚠ATTENZIONE: con attenzione ispezionare la fionda prima di ogni utilizzare e dopo ogni riciclaggio per Indossare e danni alle cuciture, al tessuto e alle maniglie. Le imbracature strappate, tagliate, sfilacciate o danneggiate possono rompersi, con conseguente In serio personale lesioni all'utente o all'assistente. Utilizzare solo diapositiva fogli Quello Sono In Bene condizione. Scartare e distruggere le vecchie imbracature inutilizzabili e sostituirle con UN nuovo uno.

⚠ATTENZIONE: FARE NON superare il sollevamento del paziente o il imbracature per pazienti peso massimo capacità..

⚠ATTENZIONE: Avviso per California Clienti -California Proposta 65 Avvertimento -Questo prodotto contiene una sostanza chimica nota allo Stato della California A causa cancro E

riproduttivo O sviluppare- mentale danno.

⚠️ AVVERTIMENTO: Vevor non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni O infortunio causa ed di improprio applicazione o uso di questo prodotto.

⚠️ ATTENZIONE : Mai Partire UN paziente incustodito Mentre In UN paziente sollevare fionda .

⚠️ ATTENZIONE: non tentare mai di riposizionare un paziente di tirando sul fionda cicli.

Linee guida generali per l'utilizzo della fionda:

Utilizzare un appropriato Imbracatura per pazienti che è raccomandato dal individuo medico, infermiere o medico assistente per il comfort e la sicurezza dell'individuo essendo sollevato e il loro erede specifico medico Bisogno.

FARE NON usa qualsiasi tipo di materiale (come un plastica Indietro incontinenza tampone O posti a sedere cuscino)tra IL paziente e qualsiasi paziente imbracatura poiché ciò potrebbe causare IL paziente A diapositiva fuori del fionda durante il trasferimento.

IL gli anelli della fionda sono codificati a colori e possono Essere usato A posto IL paziente In vario posizioni.Il colori Fare è facile collegare entrambi i lati dell'imbracatura ugualmente.Fare Sicuro Quello Là È sufficiente Testa supporto Quando sollevamento un paziente.

Materiale dell'imbracatura

Materiale dell'imbracatura: Poliestere / Materiale cinghie: Polipropilene

Utilizzo di una fascia per gambe divise, di una fascia a U o di una fascia per il water

Nota: assicurarsi che il peso del paziente non non superare il peso capacità per IL paziente fionda O sollevare prima di tentare A sollevare IL paziente.

Nota: utilizzare il seguente metodo per semplificare mossa il paziente ed

evitare sottoporre a tensione A te stesso.

Nota: il seguente metodo presuppone la presenza di un assistente e di un caregiver.

⚠ATTENZIONE: se il paziente è in un sedia a rotelle, fissare i freni delle ruote posto A impedire IL sedia a rotelle dal muoversi avanti o indietro

1. Serratura Entrambi ruota posteriore serrature SU la sedia a rotelle .
Fare riferimento a Figura 1.

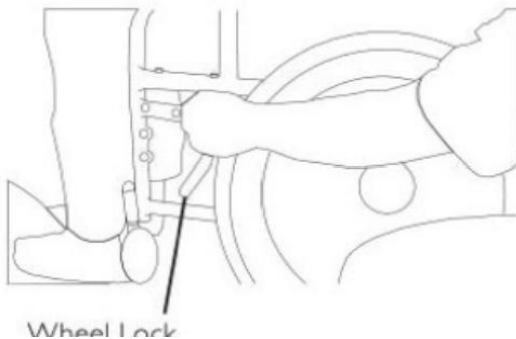


FIGURA 1: Blocco ruota

2. Con il paziente seduto su una sedia a rotelle uno l'assistente è davanti alla sedia a rotelle e il un altro assistente seduto dietro la sedia a rotelle, inclina il paziente in avanti. Fare riferimento al dettaglio "A" nella Figura 2.

Nota: l'assistente frontale supporterà il peso di il paziente.

Nota: le imbracature per il water hanno un fibbia della vita Quale aiuta a tenere ferma la fionda durante il posizionamento.

3. Posto IL fionda dietro IL paziente (con "preda gestire"su IL al di fuori) E portare fuori i lembi lungo il paziente t gambe. Fare riferimento a Dettaglio "B" in Figura 2.

Nota: per il Diviso Gamba fionda e Fionda a U: la parte posteriore della fionda dovrebbe Essere parallelo A IL pazienti braccia superiori e Essere posizionato tra la parte superiore dei pazienti Testa e la base della colonna vertebrale

DETTAGLIO "A"

FIGURA 2: Posizionamento della fionda



4. Con la parte posteriore dell'imbracatura posizionata correttamente, spingere la parte inferiore della sezione posteriore verso il sedile.

5. ... dia a rotelle con l'assistente seduto dietro

parte posteriore Di la fionda dovrebbe essere superiori e sii posizionato fra la parte superiore e della colonna vertebrale

6. ... e (una alla volta) e raggiungere sotto la gamba del anteriore della fionda finché non è dietro le 3 pollici).La parte posteriore della fionda dovrebbe ... riferimento ai dettagli da "C" a "F" nella Figura 3.

Nota: le cinghie possono essere intorno, incrociate tra o sotto le gambe del paziente. Fare riferimento al dettaglio "G" nella Figura 3.

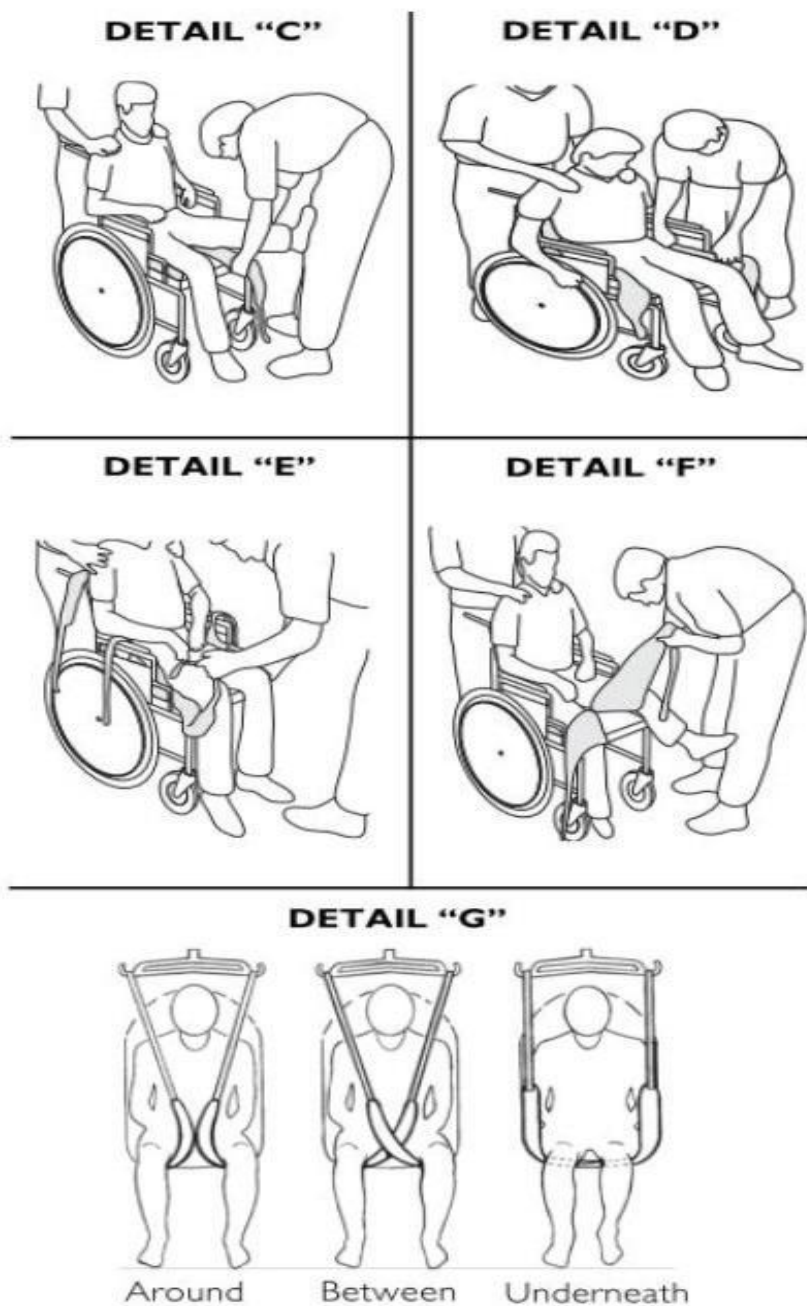


FIGURA 3: Posizionamento dell'imbracatura

Istruzioni per il lavaggio :

Lavare in lavatrice con acqua calda o fredda a ciclo normale. Massimo acqua temperatura Di 120°F Temperatura ambiente (48°C) Aria secco o cadere Asciutto A Freddo O molto Basso temperatura . FARE NON utilizzo candeggina O lavare con altro colori . Ispezionare Dopo ogni lavare . FARE NON Asciutto pulito ..

⚠ AVVERTIMENTO : Ispezionare paziente fionde per Indossare precedente A ogni utilizzo . Se segni Di lacerazione , sfilacciamento O Indossare Sono trovato , scartare IL fionda immediatamente ; indossato fuori fionde Sono non sicuro per utilizzo E Maggio risultato In infortunio O morte . Fare non alterare le fionde In Qualunque modo .

Limitato a vita Garanzia

Tuo Vevor fionda È garantito A Essere gratuito da difetti In materiali E lavorazione per UN periodo Di uno anno da IL data Di acquistare . Questo garanzia È esteso soltanto A IL originale acquirente / utente Di Nostro Vevor imbracature . Se entro come garanzia periodo Qualunque come prodotto deve Essere dimostrato A Essere difettoso , come prodotto deve Essere riparato O sostituito , a Di Vevor opzione . Questo garanzia fa non includere Qualunque lavoro O spedizione accuse sostenuto In sostituzione O riparazione Di Qualunque come prodotto . Di Vevor suola obbligo E tuo esclusivo rimedio Sotto Questo garanzia deve Essere limitato A come riparazione e / o sostituzione . Utile vita Di Questo prodotto è 6 mesi da data di acquisto Sotto normale utilizzo , Tuttavia , pesante utilizzo O eccessivo lavaggio Maggio ridurre IL utile vita Di IL prodotto . Questo garanzia fa non copertina dispositivo fallimento dovuto A proprietario abuso O negligenza , O normale Indossare E lacrima , o non corretto lavaggio E essiccazione A temperature più alto di 120°F (48°C), oppure fallimento A aderire A IL istruzioni in questo manuale. Vevor non sarà responsabile per Qualunque consequenziale O incidentale danni di alcun tipo. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziale danno , O limitazione SU Come lungo UN garanzia implicita dura , quindi IL Sopra esclusioni E limitazioni Maggio non fare domanda a A Voi . Questo garanzia deve Essere esteso conformarsi con stato O provinciale legislazione E requisiti .

Produttore: Dongguan Chuangguo Daily Products Co. Ltd
Indirizzo: No.169.Kangyi Road, città di Qingxi, città di Dongguan,
Guangdong.CN 523657

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am
Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support